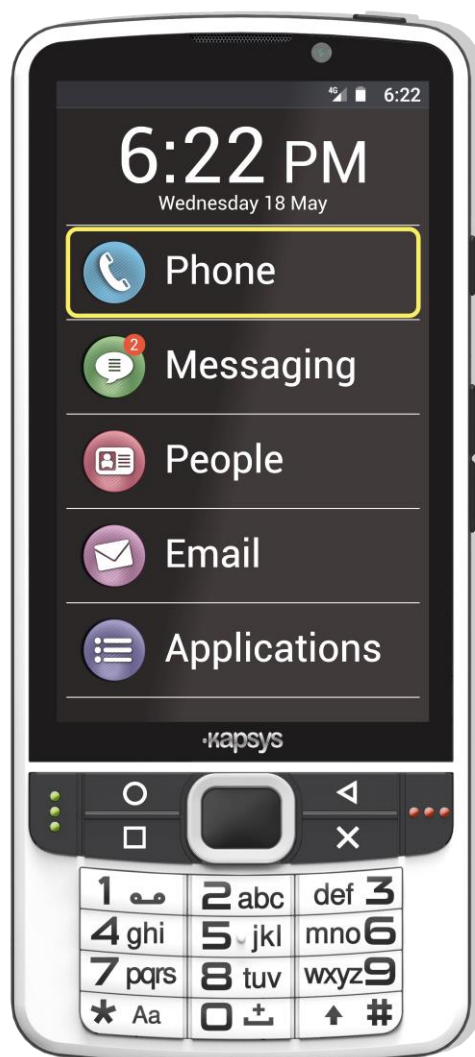




Podręcznik użytkownika SmartVision2

Wstęp	8
Do przeczytania przed pierwszym użyciem	8
Jak czytać ten dokument.....	8
Zawartość zestawu	8
Przegląd zestawu.....	8
Przegląd SmartVision2	9
Panel przedni	9
Krawędź górna	10
Krawędź prawa	10
Krawędź dolna	10
Panel tylny	10
Konfigurowanie SmartVision2.....	10
Wkładanie karty SIM	10
Montaż baterii:	10
Ładowanie baterii	11
Włączanie i wyłączanie telefonu	11
Tryb gotowości.....	11
Szybkie ustawienia podczas uruchamiania.....	11
Odblokowywanie karty SIM.....	12
Tryby sterowania	12
Tryb klawiatury.....	12
Tryb ekranu dotykowego.....	14
Tryb rozpoznawania mowy	15
Ułatwienia dostępu	16
Ustawienia	16
Usługa ułatwień dostępu Kapsys	18
Menu kontekstowe ułatwień dostępu	20
Globalne menu kontekstowe.....	20
Lokalne menu kontekstowe.....	20
Skróty klawiszowe.....	21
Skróty powiązane z usługą ułatwień dostępu, uruchamiane z klawiszem kratki	22
Skróty edycyjne uruchamiane z klawiszem gwiazdki.	23
Ekran główny	23
Dostosowywanie Ekranu głównego	24
Dodawanie aplikacji do Ekranu głównego	24
Usuwanie aplikacji z Ekranu głównego.....	24
Zmiana położenia aplikacji na Ekranie głównym	24

Aplikacje	24
Otwieranie aplikacji	24
Zamykanie aplikacji.....	24
Wyszukiwanie aplikacji.....	25
Pobieranie aplikacji	25
Odinstalowywanie aplikacji	25
Powiadomienia	25
Zarządzanie powiadomieniami.....	25
Wyświetlanie powiadomień	25
Usuwanie wszystkich powiadomień.....	25
Szybkie ustawienia	26
Book Reader.....	26
Import dokumentów.....	26
Ekran główny	26
Czytanie dokumentu	27
Zarządzanie ulubionymi	28
Dodawanie dokumentu do listy ulubionych.....	28
Usuwanie dokumentu z listy ulubionych	28
Tworzenie książki Daisy	28
Tworzenie nowej książki Daisy	28
Dodawanie nagrania audio do istniejącego audiobooka.....	28
Kalkulator.....	28
Wykonywanie podstawowych obliczeń	28
Kalendarz	29
Kamera.....	29
Wykonywanie zdjęć.....	29
Nagrywanie filmów	29
Zmiana ustawień kamery	29
Chrome.....	29
Zegar	30
Wykrywanie kolorów	30
Oznajmianie kolorów.....	30
Znajdowanie koloru	30
Kontakty.....	30
Tworzenie kontaktu	30
Edycja kontaktu.....	30
Usuwanie kontaktu.....	31

Ulubione kontakty	31
Ustawianie kontaktu jako ulubionego	31
Usuwanie kontaktu z Ulubionych.....	31
Wyszukiwanie kontaktu.....	31
Dodawanie kontaktu do ekranu głównego	32
Importowanie i eksportowanie kontaktów.....	32
Parametry	32
Gmail	32
Radio FM	33
Słuchanie radia	33
Kapten	33
Zastrzeżenia	33
Pobieranie map.....	34
Tryby nawigacji	34
Nawigacja piesza i samochodowa	34
Podczas nawigacji.....	35
Bezpośrednie prowadzenie:.....	36
Eksplorowanie mapy.....	37
Trasa piesza	37
Nagrywanie trasy.....	38
Odtwarzanie trasy.....	38
Edytowanie trasy	38
Usuwanie trasy	38
Zarządzanie znacznikami K	38
Tworzenie znacznika K.....	38
Modyfikowanie znacznika K	39
Usuwanie znacznika K	39
Swobodna nawigacja	39
Ustawienia	40
Ustawienia menu System	40
Ustawienia menu Mapy	40
Ustawienia menu Nawigacja piesza	40
Ustawienia menu Nawigacja samochodowa	40
Ustawienia menu Swobodna nawigacja	40
Ustawienia menu Bezpośrednie prowadzenie	41
Detektor światła	41
Jak wykryć poziom jasności?	41

Wideo powiększalnik	41
Powiększanie tekstu.....	41
Wiadomości	42
Wysyłanie wiadomości	42
Odczytywanie wiadomości	42
Usuwanie wiadomości.....	42
Parametry	42
NFC	43
Przypisywanie czynności do elektronicznych znaczników NFC	43
Odczytywanie znaczników NFC	44
Notatki	44
Tworzenie notatki	44
Odczytywanie notatki	44
Modyfikacja notatki.....	44
Usuwanie notatki.....	44
OCR.....	45
Wstęp.....	45
Opcje i parametry OCR.....	45
Wykonanie zdjęcia	45
Odczytywanie wyniku OCR.....	46
Telefon.....	46
Odbieranie połączenia	46
Kończenie połączenia	46
Odrzucanie połączenia.....	46
Wykonywanie połączenia	46
Opcje podczas połączenia	47
Zdjęcia Google	48
Muzyka Play	48
Sklep Play.....	48
SOS.....	48
Włączanie i wyłączanie funkcji SOS	48
Ustawianie parametrów funkcji SOS	49
Ustawienia	49
Ustawienia ogólne.....	49
Kategoria sieć bezprzewodowa i sieci	49
Kategoria urządzenie.....	50
Kategoria Osobiste	50

Kategoria system.....	50
Połączenie z Wi-Fi	51
Połączenie z urządzeniem bluetooth.....	51
Aktualizacja urządzenia	51
Zmiana głosu syntezy	52
Ustawienia mechanizmu wielojęzyczności	52
Rejestrator głosu	52
Nagrywanie notatki głosowej.....	52
Odtwarzanie notatki głosowej	53
Zmiana nazwy notatki głosowej	53
Usuwanie notatki głosowej.....	53
Web Radio.....	53
Słuchanie stacji radiowej.....	53
FAQ	54
Informacje ogólne	54
Synteza mowy i rozpoznawanie mowy.....	55
Łączność.....	56
Telefon i SMS	57
Odtwarzacz MP3 i radio FM.....	58
NFC.....	58
Kapten GPS	59
OCR	60
Ograniczenia OCR	60
O tym dokumencie.....	61
Problemy techniczne	61
Informacje prawne i gwarancja	62
Środki ostrożności i zalecenia dotyczące użytkowania	63
Bezpieczeństwo i zdrowie	63
Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności	63
Ograniczenia gwarancji	63
Ograniczenie odpowiedzialności	64
Informacje na temat poziomu absorpcji energii	65
Obsługa klienta	65
Znaki handlowe	65
O tym dokumencie	66
Specyfikacja techniczna	66
System operacyjny.....	66

Wygląd	66
Sprzęt.....	66
KAMERA.....	67

Wstęp

Do przeczytania przed pierwszym użyciem

Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszej instrukcji, by móc bezpiecznie i optymalnie korzystać z urządzenia SmartVision2.

- Opisy przedstawione w tym dokumencie bazują na domyślnych ustawieniach urządzenia.
- W zależności od lokalizacji, operatora sieci lub właściwości oprogramowania, zawartość opisów dla różnych urządzeń może się różnić.
- Treści wymagające intensywnego użycia procesora i pamięci mogą wpływać na ogólną wydajność urządzenia. Aplikacje związane z tymi treściami mogą nie działać prawidłowo w zależności od charakterystyki urządzenia i warunków użytkowania.
- KAPSYS nie ponosi odpowiedzialności za wydajność aplikacji firm trzecich, pobranych ze Sklepu Play.
- Usługi transmisji danych, takie jak wysyłanie lub odbieranie wiadomości, przesyłanie lub pobieranie danych, automatyczna synchronizacja lub korzystanie z usług lokalizacyjnych, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, w zależności od rodzaju abonamentu. W przypadku dużych transferów danych zalecamy korzystanie z Wi-Fi.
- Aplikacje domyślnie udostępnione na tym urządzeniu mogą ulec zmianie lub przestać być dostępne bez powiadomienia.
- Informacje opublikowane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. KAPSYS zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści tego dokumentu bez obowiązku powiadamiania jakiegokolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmiotu. KAPSYS nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne, braki w niniejszym podręczniku ani za przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użytkowania tego dokumentu.
- KAPSYS dąży do ciągłej poprawy jakości i funkcjonalności tego produktu. W związku z powyższym KAPSYS zachęca do odwiedzania strony internetowej www.kapsys.com w celu uzyskania najnowszych aktualizacji dokumentacji, dotyczącej użytkowania i działania tego produktu.
- Urządzenie spełnia wszystkie wymagania prawne CE jako produkt użytku domowego lub komercyjnego.

Jak czytać ten dokument

Niniejszy podręcznik użytkownika opisuje główne funkcje SmartVision2 i tryby jego pracy. Opis funkcji ma charakter ogólny i nie uwzględnia specyfiki związanej z zaawansowanymi funkcjami ułatwień dostępu.

Zaawansowane funkcje ułatwień dostępu, domyślnie włączone w urządzeniu, zostały szczegółowo opisane w rozdziale Ułatwienia dostępu.

Zawartość zestawu

Przegląd zestawu

Opakowanie ze SmartVision2 zawiera:

- Baterię
- Ładowarkę 220/110 V, 5 V USB
- Kabel USB typu C

- Słuchawki stereofoniczne z mikrofonem
- Pokrowiec zabezpieczający
- Smycz do zawieszania telefonu na szyi
- 5 znaczników NFC
- Skróconą instrukcję obsługi

Lista akcesoriów zależy od kraju sprzedaży, konfiguracji urządzenia oraz od jego wersji.

Dołączone akcesoria zostały stworzone z myślą o SmartVision2 i mogą nie działać z innymi urządzeniami.

Wygląd i właściwości urządzenia oraz akcesoriów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Używać należy jedynie akcesoriów autoryzowanych przez KAPSYS. Używanie nieautoryzowanych akcesoriów może spowodować problemy z wydajnością i awarie. W przypadku ich wystąpienia urządzenie nie będzie objęte gwarancją KAPSYS.

Przegląd SmartVision2

SmartVision2 to smartfon stworzony z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących. Funkcje ułatwień dostępu i ergonomia SmartVision2 ułatwiają obsługę i ogólny dostęp do świata smartfonów.

Jest to jedyny smartfon zapewniający potrójny tryb sterowania dzięki ekranowi dotykowemu, fizycznej klawiaturze i systemowi poleceń głosowych (synteza i rozpoznawanie mowy).

Poniżej znajduje się szczegółowy opis SmartVision2.

Panel przedni

Przedni panel SmartVision2 został podzielony na dwie odrębne części: na ekran dotykowy i fizyczną klawiaturę.

Ekran dotykowy o przekątnej 4 cali znajduje się w górnej części smartfona. Głośnik i przednia kamera (2 megapiksele) do połączeń wideo znajdują się w górnej części ekranu dotykowego.

W dolnej części przedniego panelu telefonu znajduje się fizyczna klawiatura złożona z dwóch odrębnych części.

Pierwszą częścią klawiatury, znajdującą się pod ekranem, jest pad nawigacyjny, który można łatwo zidentyfikować dzięki wielokierunkowemu elementowi umożliwiającemu poruszanie się w różnych kierunkach i zatwierdzanie działań przy pomocy znajdującego się w środku przycisku OK.

Po lewej stronie elementu nawigacyjnego znajdują się umieszczone jeden nad drugim, oddzielone poziomym paskiem klawisze Home i Menu. Po prawej stronie elementu nawigacyjnego znajdują się umieszczone jeden nad drugim, oddzielone poziomym paskiem klawisze Wróć i Usuń.

Po obu stronach elementu nawigacyjnego znajdują się przyciski Odbierz połączenie i Zakończ połączenie. Przycisk Odbierz połączenie znajduje się skrajnie na lewo i został oznaczony trzema pionowymi, wypukłymi kropkami. Przycisk Zakończ połączenie znajduje się skrajnie na prawo i został oznaczony trzema poziomymi, wypukłymi kropkami.

Drugą część klawiatury stanowi klawiatura alfanumeryczna złożona z 12 klawiszy, po trzy klawisze w czterech liniach:

- 1 linia: klawisze 1, 2, 3
- 2 linia: klawisze 4, 5, 6
- 3 linia: klawisze 7, 8, 9
- 4 linia: gwiazdka, 0, znak funta

Dla ułatwienia lokalizacji na klawiszu 5 znajduje się ergonomiczny, wypukły punkt. Szczegółowy opis funkcji klawiszy znajduje się w Podręczniku użytkownika w rozdziale Tryb sterowania.

Krawędź górna

Na górnej krawędzi SmartVision2, z jej prawej strony, znajduje się przycisk On / Off.

Krawędź prawa

Pierwszym przyciskiem na prawej krawędzi SmartVision2 jest przycisk poleceń głosowych.

Tuż pod nim znajdują się przyciski Głośniej i Ciszej.

Krawędź dolna

Na dolnej krawędzi, licząc od strony lewej do prawej znajdują się:

- Gniazdo mini jack audio 3,5 do podłączania słuchawek
- Mikrofon główny
- Mocowanie smyczy do noszenia urządzenia na szyi (znajduje się w zestawie)
- Port USB do podłączania kabla USB typu C i do ładowania SmartVision2 (znajdują się w zestawie).

Panel tylny

Na górze tylnego panelu znajduje się kamera tylna (8 megapikseli) oraz dwie diody LED umieszczone po obu stronach kamery.

Tuż pod obiektywem kamery znajduje się przycisk SOS.

Tylna pokrywa SmartVision2 jest zdejmowana i zapewnia dostęp do baterii, karty SIM i karty micro SD.

Konfigurowanie SmartVision2

Wkładanie karty SIM

SmartVision2 jest kompatybilny wyłącznie z kartami Nano SIM (format 4FF). Wkładanie karty SIM należy rozpocząć od zlokalizowania nacięcia w lewym, dolnym rogu tylnego panelu telefonu. W nacięciu to trzeba wsunąć paznokcie i unieść tylną pokrywę. Złącze karty SIM znajduje się po prawej stronie przycisku SOS. Aby zainstalować kartę SIM, chip karty powinien się znajdować w położeniu w dół, zaś ścięty róg karty powinien być skierowany do lewego, górnego rogu. Kartę należy wsuwać do gniazda do góry, od siebie.

Warto wiedzieć: gniazdo pamięci zewnętrznej Micro SD znajduje się tuż nad złączem karty SIM.

Montaż baterii:

Po zdjęciu tylnej pokrywy należy włożyć baterię do przeznaczonej na nią komory, umieszczając najpierw krawędź z bolcami ładującymi, po czym wcisnąć dolną część baterii.

Na zakończenie należy włożyć na swoje miejsce górną część tylnej pokrywy telefonu, po czym mocno ją docisnąć.

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem zalecane jest ładowanie baterii przez co najmniej 4 godziny. Czas kolejnych ładowań jest uzależniony od sposobu użytkowania i stopnia rozładowania baterii.

Baterię można ładować wyłącznie przy użyciu kabla USB i zasilacza sieciowego dostarczonego wraz z urządzeniem SmartVision2. Kabel USB należy najpierw połączyć poprzez odpowiedni port SmartVision2 z zasilaczem sieciowym, po czym włączyć urządzenie do gniazdka. Telefon można także ładować podłączając go kablem USB bezpośrednio do komputera.

Uwaga: należy używać wyłącznie baterii, kabla USB, zasilacza sieciowego i ładowarki dostarczonych przez KAPSYS. Użycie nieautoryzowanych akcesoriów może spowodować uszkodzenia i skutkować unieważnieniem gwarancji KAPSYS.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk On/Off znajdujący się na górnej krawędzi SmartVision2. Po usłyszeniu wibracji należy zwolnić przycisk.

Jeśli telefon się nie włączy, trzeba sprawdzić czy bateria została poprawnie zainstalowana. Jeśli to konieczne, procedura instalacji baterii powinna zostać powtórzona.

Aby wyłączyć telefon, trzeba wcisnąć i przytrzymać przycisk On/Off, co spowoduje wyświetlenie Menu głównego, z którego należy wybrać przycisk Wyłącz i potwierdzić czynność. Po wyemitowaniu krótkiej serii wibracji SmartVision2 zostanie wyłączony. Ekran Menu główne zawiera także skróty do aktywowania Usługi ułatwień dostępu Kapsys, włączania i wyłączania ekranu oszczędzającego baterię i aktywowania Odwracania kolorów, przydatnego w przypadku niektórych zaburzeń widzenia. Więcej informacji na temat powyższych funkcji znajduje się w rozdziale Ułatwienia dostępu.

Tryb gotowości

Po włączeniu SmartVision2 krótkie wciśnięcie przycisku On/Off przełącza urządzenie do trybu gotowości lub budzi je, wprowadzając do trybu operacyjnego.

W trybie gotowości ekran jest co prawda wyłączony, ale wszystkie funkcje pozostają aktywne. Nadal można odbierać połączenia, wiadomości SMS, wiadomości email lub instrukcje nawigacyjne podczas korzystania z aplikacji Kapten.

Warto wiedzieć: po dwóch minutach bezczynności smartfon domyślnie przechodzi w tryb gotowości oszczędzający baterię.

Szybkie ustawienia podczas uruchamiania

Podczas pierwszego uruchomienia SmartVision2 seria wyświetlanych ekranów ułatwia szybkie skonfigurowanie smartfona.

Krok 1: Wybór języka

Po wybraniu języka przy pomocy klawiszy strzałek należy potwierdzić wybór klawiszem OK.

Oznajmiany jest wówczas komunikat w wybranym języku potwierdzający wybór. Wymagane jest kolejne potwierdzenie wyboru przy pomocy przycisku OK lub odrzucenie wyboru przy pomocy przycisku Anuluj.

Krok 2: Włączanie ułatwień dostępu

Wybranie przycisku OK aktywuje usługę ułatwień dostępu KAPSYS i wszystkie funkcje oznajmiania ekranów.

Wybranie przycisku Anuluj uruchamia smartfon bez usługi ułatwień dostępu.

Krok 3: Wybieranie profilu

Do wybierania profilu służą klawisze strzałek. Do dyspozycji są następujące profile:

Niewidomy: Ustawienia ułatwień dostępu zostaną w tym przypadku skonfigurowane z myślą o potrzebach osób niewidomych.

Niedowidzący: Ustawienia ułatwień dostępu zostaną skonfigurowane z myślą o potrzebach osób niedowidzących.

Po wykonaniu ostatniego z tych kroków SmartVision2 uruchomi się z ekranem wyboru kodu PIN przypisanego do karty SIM.

Odblokowywanie karty SIM

Karta SIM jest zabezpieczona przez operatora czterocyfrowym kodem identyfikacyjnym, nazywanym kodem PIN. Kod PIN chroni kartę SIM przed ewentualnością jej nieuczciwego użycia przez osoby trzecie. Aby odblokować kartę SIM i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji SmartVision2, należy wprowadzić kod PIN i wcisnąć przycisk OK.

Dla zachowania poufności głosowe oznajmianie na etapie wprowadzania kodu PIN słyszalne jest wyłącznie w słuchawkach.

Tryby sterowania

SmartVision2 oferuje 3 tryby sterowania: tryb klawiatury, tryb ekranu dotykowego i tryb rozpoznawania mowy.

Tryb klawiatury

Tryb klawiatury jest podstawowym trybem sterowania SmartVision2. Tryb ten umożliwia nawigowanie po telefonie i uruchamianie aplikacji przy pomocy długich i krótkich wciśnień przycisków na klawiaturze.

W celu zapoznania się z funkcjami klawiszy prosimy przeczytać rozdział Przegląd SmartVision2.

Poniżej znajduje się lista czynności, które można wykonać przy pomocy fizycznej klawiatury:

Czynność	Klawiatura
Przejdź do poprzedniego elementu	Krótkie wciśnięcie klawisza strzałka w górę
Przejdź do następnego elementu	Krótkie wciśnięcie klawisza strzałka w dół

Przewiń stronę w górę	Długie wciśnięcie klawisza strzałka w górę
Przewiń stronę w dół	Długie wciśnięcie klawisza strzałka w dół
Przejdź do pierwszego widocznego elementu na ekranie	Krótkie wciśnięcie klawisza strzałka w lewo
Przejdź do ostatniego widocznego elementu na ekranie	Krótkie wciśnięcie klawisza strzałka w prawo
Przejdź do strony po lewej (jeśli jest dostępna)	Długie wciśnięcie klawisza strzałka w lewo
Przejdź do strony po prawej (jeśli jest dostępna)	Długie wciśnięcie klawisza strzałka w prawo
Aktywuj / Zatwierdź wybrany element	Krótkie wciśnięcie przycisku OK
Otwórz opcje kontekstowe wymienionego elementu	Długie wciśnięcie przycisku OK
Odbieranie połączenia przychodzącego, szybki dostęp do aplikacji	Krótkie wciśnięcie klawisza wyboru
Rozłącz	Krótkie wciśnięcie klawisza rozłączania
Przejdź do strony głównej	Krótkie wciśnięcie klawisza Home
Wyświetlanie aplikacji działających w tle	Długie wciśnięcie klawisza Home
Poprzedni ekran	Krótkie wciśnięcie klawisza Powrót
Powiadomienia ekranowe	Długie wciśnięcie klawisza Powrót
Usuń znak w polu wprowadzania	Krótkie wciśnięcie klawisza Wyczyść
Szybkie usuwanie wszystkich znaków w polu wprowadzania	Długie wciśnięcie klawisza Wyczyść
Menu	Krótkie wciśnięcie klawisza Menu
Otwarcie globalnego menu ułatwień dostępu	Długie wciśnięcie klawisza Menu
Tryb gotowości / tryb operacyjny	Krótkie wciśnięcie przycisku ON / OFF
Otwieranie głównego menu (ON / OFF)	Długie wciśnięcie przycisku ON / OFF
Zwiększanie głośności, przesunięcie kursora w prawo, wyciszenie dzwonka telefonu podczas połączenia przychodzącego	Krótkie wciśnięcie przycisku Głośniej
Redukcja głośności, przesunięcie kursora w lewo, wyciszenie dzwonka telefonu podczas połączenia przychodzącego i oznajmianie informacji o osobie dzwoniącej	Krótkie wciśnięcie przycisku Ciszej

Warto wiedzieć: Usługa ułatwień dostępu Kapsys automatycznie aktywowana w SmartVision2 udostępnia dodatkowe skróty. Skróty te są opisane w rozdziale Ułatwienia dostępu.

Tryb ekranu dotykowego

Tryb ekranu dotykowego jest kolejnym trybem sterowania SmartVision2. Tryb ten umożliwia poruszanie się po różnych menu przy pomocy opuszków palców.

Usługa ułatwień dostępu Kapsys automatycznie aktywowana w SmartVision2 modyfikuje zachowanie ekranu dotykowego, by lepiej dostosować go do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku.

Poniżej znajduje się lista czynności, które można wykonać z poziomego ekranu dotykowego, kiedy aktywna jest usługa ułatwień dostępu Kapsys:

Czynność	Ekran dotykowy
Przeglądaj ekran i wybierz element	Dotknięcie ekranu jednym palcem
Przejdź do poprzedniego elementu	Przesunięcie w lewo jednym palcem
Przejdź do następnego elementu	Przesunięcie w prawo jednym palcem
Przewiń stronę w górę, przesunij kursor w prawo	Przesunięcie jednym palcem w prawo, następnie w lewo
Przewiń stronę w dół, przesunij kursor w lewo	Przesunięcie jednym palcem w lewo, następnie w prawo
Przejdź do pierwszego widocznego elementu na ekranie	Przesunięcie jednym palcem w górę i w dół
Przejdź do ostatniego widocznego elementu na ekranie	Przesunięcie jednym palcem w dół i w górę
Przejdź do strony po lewej (jeśli jest dostępna)	Przesunięcie w lewo dwoma palcami
Przejdź do strony po prawej (jeśli jest dostępna)	Przesunięcie dwoma palcami w prawo
Aktywuj / Zatwierdź wybrany element	Szybkie, podwójne stuknięcie jednym palcem
Otwórz opcje kontekstowe wymienionego elementu	Szybkie, dwukrotne stuknięcie i przytrzymanie
Przejdź do strony głównej	Przesunięcie jednym palcem w górę, następnie w lewo
Wyświetlanie aplikacji działających w tle	Przesunięcie jednym palcem w lewo, następnie w górę
Poprzedni ekran	Przesunięcie jednym palcem w dół, następnie w lewo
Powiadomienia	Przesuwanie z góry na dół dwoma palcami
Otwarcie globalnego menu ułatwień dostępu	Przesunięcie jednym palcem w dół, następnie w prawo
Otwarcie lokalnego menu ułatwień dostępu	Przesunięcie jednym palcem w górę, następnie w prawo
Progresywny ruch pionowy	Dotykanie w górę lub w dół dwoma palcami

Warto wiedzieć: Usługa ułatwień dostępu Kapsys automatycznie aktywowana w SmartVision2 udostępnia dodatkowe gesty dotykowe. Zostały one opisane w rozdziale Ułatwienia dostępu.

Tryb rozpoznawania mowy

Tryb rozpoznawania mowy jest ostatnim trybem sterowania SmartVision2. Tryb ten umożliwia dyktowanie tekstu do pola wprowadzania, wykonywanie wyszukiwania w Internecie lub uruchamianie określonych funkcji.

SmartVision2 korzysta z rozpoznawania mowy Google, dlatego do korzystania z tej usługi wymagane jest połączenie internetowe. Korzystanie z niej jest możliwe po krótkim wciśnięciu przycisku rozpoznawania mowy, znajdującego się po prawej stronie urządzenia SmartVision2 i wyraźnym wypowiedzeniu polecenia.

Poniżej znajdują się przykłady czynności, które można wykonać w trybie rozpoznawania mowy:

- Kalendarz, alarmy, przypomnienia oraz informacje
 - Ustawianie alarmu: ustawianie alarmu można wykonać przy pomocy przykładowych poleceń - "Ustaw alarm na godzinę 7" lub "Ustaw alarm na godzinę 7 rano w każdy piątek."
 - Ustawianie przypomnienia: ustawianie przypomnień można wykonać przy pomocy przykładowych poleceń - "Przypomnij mi o telefonie do Jana o godzinie 18" lub "Przypomnij mi o kupieniu czekolady w sklepie Wedla."
 - Oglądanie wiadomości SMS: wiadomości można przeglądać przy pomocy przykładowego polecenia - "Pokaż wiadomości od Ewy na temat spotkania."
 - Tworzenie wydarzenia w Kalendarzu Google: wydarzenie w kalendarzu można utworzyć za pomocą przykładowego polecenia - "Utwórz w kalendarzu wydarzenie konferencja w Warszawie w poniedziałek o godzinie 14."
- Komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi
 - Telefon do przyjaciela: telefon do przyjaciela lub członka rodziny można wykonać stosując przykładowe polecenia - "Zadzwoń do Pawła Nowakowskiego" lub "Zadzwoń do Mamy."
 - Wiadomość do przyjaciela: wiadomość do przyjaciela można wysłać stosując przykładowe polecenie - "Napisz do Marii, że spóźnię się 5 minut."
 - Wyślij email: email można wysłać stosując przykładowe polecenie - "Wyślij email do Anny, temat nowa książka, wiadomość nie mogę się doczekać kiedy ją przeczytasz, kropka."
- Fakty i szybkie odpowiedzi
 - Podawanie czasu: czas w różnych miejscach świata można sprawdzać przykładowym poleceniem - "Która jest godzina w Londynie?"
 - Sprawdzanie pogody: pogodę można sprawdzać przy pomocy przykładowych poleceń - "Czy dziś będzie mi potrzebna kurtka?" lub "Jaka będzie pogoda po południu?"
 - Tłumaczenie słów lub zdań: wybrane słowo można przetłumaczyć zadając przykładowe pytanie - "Jak powiedzieć po angielsku cebula?"

- Definicja wyrazu: definicję wyrazu można uzyskać zadając przykładowe pytanie - "Co znaczy prekluzja?"
- Konwersja jednostek miar i wag: konwersję jednostek miary można uzyskać zadając przykładowe pytanie - "Ile mil ma jeden kilometr?"
- Rozwiązywanie zadań matematycznych: zadanie można rozwiązać zadając przykładowe pytanie "Ile wynosi pierwiastek kwadratowy z 2209?"

Pełna lista czynności, które można wykonywać w trybie rozpoznawania mowy jest dostępna w rubryce Pomoc Google lub po wywołaniu słów kluczowych "Ok Google" .

Warto wiedzieć: Przycisk rozpoznawania mowy umożliwia pisanie tekstu dyktowanego głosem w polu wprowadzania. Wystarczy krótko wcisnąć przycisk rozpoznawania mowy znajdujący się po prawej stronie SmartVision2, poczekać na sygnał i podyktować swój tekst. Po zakończeniu tekst zostanie automatycznie wpisany do pola wprowadzania.

Ułatwienia dostępu

Ustawienia

SmartVision2 został domyślnie wyposażony w wiele ustawień ułatwień dostępu, m.in. w regulację tempa mowy, rozmiaru czcionki i w skróty klawiszowe.

Ustawienia dostępności zmienia się wybierając menu Ustawienia, po czym Ułatwienia dostępu.

Do dyspozycji są następujące ustawienia:

- **Usługa ułatwień dostępu Kapsys:** umożliwia przekazywanie osobom niewidomym i niedowidzącym zwrotnych informacji głosowych. Poniższa sekcja opisuje różne parametry usługi ułatwień dostępu Kapsys.

Warto wiedzieć: Usługę ułatwień dostępu Kapsys można zawiesić w dowolnym momencie, wciskając i przytrzymując przyciski Głośniej i Ciszej. Ponowne wciśnięcie i przytrzymanie tych przycisków aktywuje usługę.

- **Przełącz ułatwienia dostępu:** umożliwia sterowanie urządzeniem przy pomocy kombinacji klawiszy, które mogą być konfigurowane przez użytkownika. Ustawienie to jest szczególnie przydatne dla osób z zaburzeniami motorycznymi, chcących powiązać określone czynności z określonymi przyciskami lub korzystać z zewnętrznej klawiatury.
- **Napisy:** usługa umożliwia włączanie napisów na urządzeniu, wybieranie języka oraz opcji stylów tekstu.
- **Gesty powiększania:** umożliwiają powiększanie i pomniejszanie ekranu SmartVision2 przy pomocy gestu potrójnego dotknięcia w dowolnym miejscu wyświetlacza. Przesuwanie i poziom powiększenia można dostosowywać w następujący sposób:
 - W celu przesuwania obiektów na ekranie trzeba przeciągnąć po nim dwoma lub kilkoma palcami
 - W celu dostosowania poziomu powiększenia trzeba zsunąć lub rozsunąć dwa palce

W celu tymczasowego powiększenia ekranu należy:

- Wykonać gest trzykrotnego stuknięcia i przytrzymania w dowolnym miejscu na ekranie z wyjątkiem klawiatury i paska nawigacyjnego
- W celu przesunięcia powiększanego obszaru trzeba przeciągnąć palcem po ekranie
- Uniesienie palca spowoduje zatrzymanie powiększania
- **Rozmiar czcionki:** umożliwia takie dostosowanie rozmiaru czcionki, by był on optymalny dla wzroku użytkownika. Dostępnych jest siedem rozmiarów czcionki.
- **Tekst o wysokim kontraście:** wysoki kontrast sprawia, że tekst jest łatwiejszy w czytaniu. Funkcja ta zamienia kolor czcionki tekstu na biały lub czarny w zależności od oryginalnego koloru czcionki tekstu.
- **Przycisk zasilania kończy rozmowę:** kiedy ustawienie to jest włączone, wystarczy wcisnąć przycisk zasilania urządzenia, by zakończyć rozmowę, co sprawia, że zakończenie rozmowy jest prostsze i szybsze.
- **Odbieranie połączeń przy pomocy klawiszy 0-9:** umożliwia odbieranie połączeń przychodzących przy pomocy klawiszy numerycznych klawiatury.
- **Autoobracanie ekranu:** kiedy ustawienie to jest włączone, ekran obraca się automatycznie podczas obracania telefonu w pionie i w poziomie z pozycji portret do pozycji krajobraz.
- **Wypowiadaj hasła na głos:** ustawienie to umożliwia kontrolowanie poprawności wpisywanych haseł poprzez wypowiadanie ich głosem.
 - Włączone: znaki hasła są oznajmiane w sposób słyszalny, podobnie jak inne wpisywane znaki.
 - Wyłączone: znaki wpisywanego hasła są słyszalne jedynie poprzez zestaw słuchawkowy. Dla zachowania prywatności użytkownika ustawienie to jest domyślnie wyłączone.
- **Skrót ułatwień dostępu:** umożliwia szybkie włączanie i wyłączanie ułatwień dostępu.
- **Przetwarzanie tekstu na mowę:** umożliwia wybranie syntezy mowy SmartVision2:
 - Głosy Kapsys: umożliwia wybranie kompaktowej syntezy mowy lub pobranie bezpłatnej syntezy mowy za pośrednictwem połączenia internetowego.
 - Wielojęzyczność: umożliwia skojarzenie maksymalnie trzech języków przy pomocy skrótów klawiszowych oraz natychmiastową zmianę języka systemu podczas pracy.

Można ponadto aktywować i skonfigurować inny syntezytor mowy pobrany ze Sklepu Play.

- **Czas dotknięcia i przytrzymania:** ustawienie to reguluje czas, po upływie którego dotknięcie ekranu staje się dotknięciem i przytrzymaniem. Dłuższy czas dotknięcia i przytrzymania oznacza, że by dotyk stał się dotknięciem i przytrzymaniem, palec powinien znajdować się w jednym położeniu dłużej niż podczas zwykłego dotknięcia. Jeśli zbyt długie dotknięcia ekranu powodują

efekt przypadkowego przytrzymania, warto rozważyć wydłużenie czasu przeznaczonego na dotknięcie i przytrzymanie.

- **Inwersja kolorów:** prowadzi do odwrócenia kolorów, a więc do ich zmiany. Dla przykładu - czarny tekst na białym ekranie zmieni się na biały tekst na czarnym ekranie.
- **Korekta kolorów:** ustawienie korekty kolorów umożliwia zrekompensowanie niedostatków widzenia barw u daltonistów.

Usługa ułatwień dostępu Kapsys

Kiedy usługa ułatwień dostępu Kapsys jest włączona, SmartVision2 udostępnia niewidomym i niedowidzącym użytkownikom zwrotne informacje głosowe, umożliwiające obsługę urządzenia bez konieczności patrzenia na ekran. Włączanie lub wyłączanie usługi ułatwień dostępu Kapsys następuje po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania ON/OFF i wybraniu przycisku Usługa ułatwień dostępu Kapsys.

Wstrzymanie lub czasowe uruchomienie usługi ułatwień dostępu Kapsys następuje po wciśnięciu i jednoczesnym przytrzymaniu przycisków Głośniej i Ciszej.

Modyfikacja parametrów usługi ułatwień dostępu Kapsys jest możliwa po wybraniu menu Ustawienia, Ułatwienia dostępu Kapsys i wciśnięciu klawisza Menu Android.

Poniżej znajduje się lista następujących parametrów usługi ułatwień dostępu Kapsys:

- **Czytnik ekranu:** opcja ta umożliwia włączanie i wyłączanie mechanizmu zamiany tekstu na mowę.
- **Głośność mowy:** opcja ta umożliwia ustawianie głośności mowy na poziomie głośności mniejszej lub równej głośności multimedialnych. Przez głośność multimedialnych należy rozumieć głośność innych dźwięków SmartVision2.
- **Zmiana wysokości tonu:** opcja ta zmienia wysokość głosu klawiatury. Po jej wybraniu udźwiękowienie klawiatury zostanie ustawione na głos o niskim tonie.
- **Edytor echa:** opcja ta określa, czy mechanizm zamiany tekstu na mowę będzie oznajmiał znaki, słowa czy zdania.
- **Wibracje po wpisaniu znaku:** opcja uruchamia wibracje po wpisaniu znaku w polu wprowadzania.
- **Dźwięk po wpisaniu znaku:** wybranie tej opcji aktywuje dźwięk po wpisaniu znaku w polu wprowadzania.
- **Czas na sprawdzenie poprawności znaku:** opcja ta umożliwia zdefiniowanie czasu sprawdzania poprawności znaku wpisanego w polu wprowadzania.
- **Mów przy wyłączonym ekranie:** wybranie tej opcji udostępnia powiadomienia głosowe przy wyłączonym ekranie.
- **Czujnik zbliżeniowy:** wybranie tej opcji pozwala na czasowe wyciszenie zamiany tekstu na mowę w zależności od informacji docierających z czujnika zbliżeniowego.
- **Oznajmiał wyświetlane elementy:** opcja ta udostępnia oznajmianie widocznych elementów wyświetlanych na ekranie, np. elementy od 1 do 6 z 12.

- **Potrząśnij by uruchomić ciągłe czytanie:** wybranie tej opcji powoduje, że potrząśnięcie smartfonem uruchamia ciągłe czytanie.
- **Oznajmiał litery fonetycznie:** wybranie tej opcji udostępnia fonetyczne oznajmianie liter, np. F jak Feliks, S jak Stanisław, po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza na wirtualnej klawiaturze dotykowej.
- **Oznajmiał przydatne wskazówki:** Wybranie tej opcji powoduje oznajmianie przydatnych wskazówek podczas nawigacji po elementach znajdujących się na ekranie.
- **Oznajmiał ID rozmówcy:** opcja udostępnia oznajmianie numeru rozmówcy przed odebraniem połączenia.
- **Wibracje zwrotne:** opcja udostępnia wibracje w trakcie pracy z urządzeniem, np. podczas wybierania określonego elementu lub podczas poruszania się po ekranie.
- **Dźwięk zwrotny:** po wybraniu tej opcji, poza oznajmianiem, użytkownik uzyskuje dodatkowo sygnał dźwiękowy podczas poruszania się po ekranie.
- **Focus speech audio:** opcja ta umożliwia zredukowanie głośności multimediów w trakcie oznajmianych komunikatów.
- **Głośność dźwięku:** opcja ta umożliwia sterowanie poziomem głośności oznajmiania oraz głośnością innych dźwięków usługi ułatwień dostępu Kapsys. Opcja jest dostępna wówczas, gdy włączony został dźwięk zwrotny.
- **Przeglądaj dotykiem:** opcja ta umożliwia oznajmianie dotykane go elementu na ekranie i aktywowanie skrótu gestów.
- **Wyłącz ekran dotykowy:** wybranie tej opcji skutkuje wyłączeniem ekranu dotykowego.
- **Automatycznie przewijaj listy:** po wybraniu tej opcji listy przewijają się same podczas nawigacji liniowej.
- **Wybór pojedynczego stuknięcia:** po wybraniu tej opcji pojedyncze dotknięcie elementu z fokusem umożliwi zweryfikowanie elementu.
- **Pokaż menu kontekstowe w widoku listy:** wybranie tej opcji umożliwia wyświetlanie globalnego i lokalnego menu kontekstowego w postaci listy.
- **Przywołaj samouczek przeglądania dotykiem:** opcja ta umożliwia czytanie samouczka przeglądania dotykiem.
- **Skróty klawiszowe:** opcja ta udostępnia zarządzanie skrótami klawiszowymi SmartVision2.
- **Zewnętrzne skróty klawiszowe:** opcja ta udostępnia zarządzanie zewnętrznymi skrótami klawiszowymi.
- **Zarządzaj etykietami użytkownika:** opcja ta umożliwia zarządzanie etykietami utworzonymi przez użytkownika przy pomocy lokalnego menu kontekstowego.
- **MagniText:** opcja ta wyświetla i powiększa tekst z fokusem jako baner przesuwający się po ekranie. Rozmiar baneru, jego kolor oraz prędkość jego przewijania są konfigurowalne.
- **Czarny ekran:** opcja ta umożliwia włączenie czarnego ekranu, co pozwala oszczędzać baterię i zabezpieczać dane osobiste przed osobami postronnymi.

- **Wznów z zawieszenia:** opcja ta umożliwia wybranie sposobu wznowienia usługi ułatwień dostępu Kapsys po jej zawieszeniu z poziomu globalnego menu kontekstowego.
- **Obudź oznajmianie:** opcja ta umożliwia konfigurowanie typu informacji, które mają być słyszalne podczas budzenia się SmartVision2 z trybu uśpienia. Można wybierać spośród następujących informacji: oznajmianie czasu, daty, poziomu naładowania baterii, stanu sieci, oznajmianie powiadomień o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach i nowych wiadomościach email.
- **Zarządzaj ustawieniami ułatwień dostępu:** opcja ta umożliwia zapisywanie profili ułatwień dostępu, ich import, a także dzielenie się nimi.

Menu kontekstowe ułatwień dostępu

Podczas przeglądania zawartości ekranu SmartVision2 dostępne są dwa rodzaje menu kontekstowego pomagające w odnajdywaniu ustawień i przycisków. Globalne menu kontekstowe zawiera polecenia działające globalnie, natomiast działanie lokalnego menu kontekstowego jest zależne od obiektu, na którym znajduje się fokus.

Globalne menu kontekstowe

Globalne menu kontekstowe pojawia się po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza Menu.

Po aktywowaniu globalnego menu kontekstowego dostępne są następujące opcje:

- **Czytaj od góry:** opcja ta spowoduje, że odczytane zostaną wszystkie elementy na ekranie, poczynając od góry.
- **Powtórz ostatnie wyrażenie:** opcja ta spowoduje, że ostatnie wyrażenie zostanie powtórzone.
- **Literuj ostatnie wyrażenie:** opcja ta spowoduje, że ostatnie wyrażenie zostanie przeliterowane.
- **Czytaj od następnego elementu:** opcja ta spowoduje, że odczytane zostaną wszystkie elementy na ekranie, poczynając od ostatniego obiektu, na którym znajdował się fokus.
- **Wstrzymaj informacje zwrotne:** wybranie tej opcji zawiesza usługę ułatwień dostępu Kapsys, w tym powiadomienia i przeglądanie dotykiem.

UWAGA: Usługa dostępności Kapsys zostaje wznowiona po włączeniu ekranu, po wyświetleniu blokady, może także być wznowiona z poziomu paska powiadomień w zależności od wybranych preferencji wznowiania w opcji Wznawianie z zawieszenia. Preferencje te mogą być zmieniane w ustawieniach usługi ułatwień dostępu Kapsys.

- **Ustawienia usługi ułatwień dostępu Kapsys:** wybranie tej opcji otwiera ekran z ustawieniami usługi ułatwień dostępu Kapsys.
- **Ustawienia przetwarzania tekstu na mowę:** wybranie tej opcji umożliwia zmianę ustawień przetwarzania tekstu na mowę.

Lokalne menu kontekstowe

Lokalne menu kontekstowe wywołuje się wciskając i przytrzymując klawisz kratki oraz wciskając klawisz numeryczny 9.

Lokalne menu kontekstowe zawiera przyciski odnoszące się do elementów, na których znajduje się fokus. Jeśli w menu nie występuje odpowiednia opcja, usługa dostępności Kapsys oznajmia "Brak pozycji menu".

Po otwarciu lokalnego menu kontekstowego pojawiają się opcje odpowiednie dla bieżącego kontekstu. Opcje te obejmują:

- Opcje nawigacji: domyślne, znaki, słowa, akapity, linie i strony.
- Menu sterowania kursorem: podczas edycji tekstu opcja ta otwiera nowe, lokalne menu kontekstowe z następującymi funkcjami: "Przenieś kursor na początek", "Przenieś kursor na koniec", "Zaznacz wszystko" i "Rozpocznij tryb zaznaczania". Kiedy tekst w oknie edycyjnym zostanie zaznaczony, dostępne będą następujące funkcje: Wytnij, Kopiuj, Wklej i Zakończ tryb zaznaczania. By przesunąć kursor w polu edycji wystarczy naciskać przyciski głośności.
- Zarządzanie etykietami: ta pozycja menu umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie etykiet użytkownika. W aplikacjach brakuje niekiedy zaetykietowanych grafik. Usługa ułatwień dostępu Kapsys oferuje tworzenie własnych etykiet grafik, by w przyszłości były one łatwe do zidentyfikowania. Własnymi etykietami można następnie zarządzać przy pomocy funkcji "Zarządzanie etykietami użytkownika", która znajduje się w ustawieniach usługi ułatwień dostępu Kapsys.

Skróty klawiszowe

Przy pomocy opcji usługi ułatwień dostępu Kapsys można przypisać do 32 skrótów klawiszowych dla zdefiniowanych czynności.

Skróty klawiszowe stanowią kombinację wciśniętych i przytrzymanych klawiszy gwiazdka i kratka z klawiszami numerycznymi od 0 do 9, klawiszami strzałek w górę, w dół, w lewo, w prawo oraz klawiszami Głośniej i Ciszej.

Lista czynności, które można skojarzyć z klawiszami skrótów prezentuje się następująco:

- Uzyskaj status SmartVision2
- Otwórz ekran powiadomień
- Otwórz zakładkę Szybkich ustawień na ekranie powiadomień
- Zwiększ tempo mowy
- Zmniejsz tempo mowy
- Zmień język oznajmiania
- Czytaj od początku ekranu
- Czytaj od następnego elementu
- Zmniejsz poziom szczegółowości oznajmiania
- Zwiększ poziom szczegółowości oznajmiania
- Powtórz ostatnio oznajmiany element
- Literuj ostatnio oznajmiany element
- Wstrzymaj / wznów oznajmianie
- Ustawienia ułatwień dostępu Kapsys
- Ustawienia przetwarzania tekstu na mowę

- Zaznacz wszystko
- Wytnij
- Kopiuj
- Wklej
- Przesuń kursor do lewej w polu wprowadzania
- Przesuń kursor do prawej w polu wprowadzania
- Przesuń kursor na początek w polu wprowadzania
- Przesuń kursor na koniec w polu wprowadzania
- Zaznacz znak na lewo od kursora
- Zaznacz znak na prawo od kursora
- Zwiększ głośność mowy
- Zmniejsz głośność mowy
- Włącz / wyłącz tryb MagniText
- Włącz / wyłącz tryb Gestów powiększenia
- Globalne menu usługi ułatwień dostępu Kapsys
- Lokalne menu usługi ułatwień dostępu Kapsys

Niektóre skróty klawiszowe SmartVision2 zostały domyślnie zdefiniowane. Skróty te pogrupowano w dwóch kategoriach:

- Skróty powiązane z ułatwieniami dostępu, uruchamiane z klawiszem kratki oraz
- skróty edycyjne uruchamiane z klawiszem gwiazdki.

Skróty te mogą być modyfikowane przy pomocy elementu Skróty klawiszowe w menu usługi ułatwień dostępu Kapsys.

Skróty powiązane z usługą ułatwień dostępu, uruchamiane z klawiszem kratki

- Kratka i klawisz 0: Ustawienia usługi ułatwień dostępu Kapsys
- Kratka i klawisz 1: Uzyskaj status SmartVision2
- Kratka i klawisz 2: Czytaj od początku ekranu
- Kratka i klawisz 3: Otwórz zakładkę Szybkich ustawień na ekranie powiadomień
- Kratka i klawisz 4: Zmniejsz prędkość mowy
- Kratka i klawisz 5: Zwiększ prędkość mowy
- Kratka i klawisz 6: Włącz / wyłącz tryb MagniText
- Kratka i klawisz 7: Powtórz ostatnio oznajmiany element
- Kratka i klawisz 8: Literuj ostatnio oznajmiany element
- Kratka i klawisz 9: Lokalne menu usługi ułatwień dostępu Kapsys
- Kratka i strzałka w górę: Nieprzydzielony
- Kratka i strzałka w dół: Nieprzydzielony
- Kratka i strzałka w lewo: Nieprzydzielony
- Kratka i strzałka w prawo: Nieprzydzielony
- Kratka i klawisz Głośniej: Zwiększ głośność mowy
- Kratka i klawisz Ciszej: Zmniejsz głośność mowy

Skróty edycyjne uruchamiane z klawiszem gwiazdki.

- Gwiazdka i klawisz 0: Zaznacz wszystko
- Gwiazdka i klawisz 1: Zmniejsz poziom szczegółowości oznajmiania
- Gwiazdka i klawisz 2: Zwiększ poziom szczegółowości oznajmiania
- Gwiazdka i klawisz 3: Wytnij
- Gwiazdka i klawisz 4: Nieprzydzielony
- Gwiazdka i klawisz 5: Nieprzydzielony
- Gwiazdka i klawisz 6: Kopiuj
- Gwiazdka i klawisz 7: Nieprzydzielony
- Gwiazdka i klawisz 8: Nieprzydzielony
- Gwiazdka i klawisz 9: Wklej
- Gwiazdka i strzałka w górę: Przesuń kursor na początek pola wprowadzania
- Gwiazdka i strzałka w dół: Przesuń kursor na koniec pola wprowadzania
- Gwiazdka i strzałka w lewo: Przesuń kursor do lewej w polu wprowadzania
- Gwiazdka i strzałka w prawo: Przesuń kursor do prawej w polu wprowadzania
- Gwiazdka i klawisz Głośniej: Zaznacz znak na lewo od kursora
- Gwiazdka i klawisz Ciszej: Zaznacz znak na prawo od kursora

Warto wiedzieć: Klawisze Głośniej i Ciszej umożliwiają przesuwanie kursora od lewej do prawej w obszarze wprowadzania danych, zgodnie z poziomem szczegółowości, który wstępnie zdefiniowano skrótami gwiazdka i 1 oraz gwiazdka i 2.

Do dyspozycji są następujące poziomy szczegółowości: domyślny, znaki, słowa, akapity, linie i strony.

Ekran główny

Ekran główny jest podstawowym ekranem SmartVision2. Ekran ten stanowi menu startowe, z którego można aktywować różne funkcje i aplikacje smartfona. Powrót do ekranu głównego w dowolnym momencie następuje po wciśnięciu przycisku Home.

Na ekranie głównym telefonu domyślnie znajdują się cztery aplikacje:

- **Aplikacje** : dostęp do alfabetycznej listy wszystkich aplikacji zainstalowanych na SmartVision2.
- **Telefon** : dostęp do połączeń, do sprawdzanie nieodebranych połączeń i do poczty głosowej.
- **Wiadomości** : dostęp do wysyłania i odczytywania wiadomości SMS lub MMS (krótkich wiadomości z załącznikami w postaci zdjęć lub wideo).
- **Kontakty** : dostęp do tworzenia kontaktów i zarządzania nimi.

Na ekranie głównym dostępne są też opcje dodatkowe wybierane przy pomocy przycisku Menu.

- **Ustawienia**: dostęp do ustawień smartfona.
- **Dodawanie aplikacji** : umożliwia szybkie dodawanie aplikacji do ekranu głównego.
- **Dodawanie widżetu** : umożliwia dodanie widżetu do ekranu głównego. Widżety to małe aplikacje zapewniające informacje i szybki dostęp do

konkretnych funkcji aplikacji z poziomu ekranu głównego. Widżety można pobierać online ze Sklepu Play.

- **Tapety** : dostęp do personalizowania obrazów tła Ekranu głównego.
- **Pomoc** : dostęp do Podręcznika użytkownika SmartVision2.

Dostosowywanie Ekranu głównego

Ekran główny SmartVision2 jest w pełni konfigurowalny. Do ekranu głównego można dodawać aplikacje lub widżety, zmieniać kolejność elementów, a także je usuwać.

Dodawanie aplikacji do Ekranu głównego

W celu dodania aplikacji do Ekranu głównego należy wcisnąć na tym ekranie przycisk Menu, wybrać z listy element Dodaj aplikację, po czym wybrać aplikacji, która ma zostać dodana do ekranu głównego.

Aplikację można też dodać do Ekranu głównego z poziomu Aplikacji. W tym przypadku z listy należy wybrać aplikację, która ma być dodana do Ekranu głównego, wcisnąć i przytrzymać przycisk OK, po czym z menu kontekstowego wybrać element Dodaj do ekranu głównego. Aplikacja stanie się wówczas dostępna jako ostatnia pozycja ekranu głównego.

Usuwanie aplikacji z Ekranu głównego

Usunięcie aplikacji z ekranu głównego nastąpi po jej wybraniu oraz wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku OK i po wybraniu z menu kontekstowego elementu Usuń z ekranu głównego. Aplikacja zostanie wówczas usunięta z Ekranu głównego, pozostając dostępną z poziomu Aplikacji.

Zmiana położenia aplikacji na Ekranie głównym

Zmiana położenia aplikacji na Ekranie głównym nastąpi po wybraniu aplikacji, wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku OK oraz wybraniu czynności, która ma zostać wykonana z menu kontekstowego: przesunąć w górę, przesunąć w dół, przesunąć na początek, przesunąć na koniec.

Warto wiedzieć: jeśli aplikacja zostanie umieszczona na ekranie głównym w celu szybkiego dostępu do niej, w lewym górnym rogu ikony aplikacji pojawi się żółta gwiazdka.

Aplikacje

Wszystkie aplikacje zainstalowane na SmartVision2 są dostępne na ekranie głównym po wybraniu ikony Aplikacje. Aplikacje są wyświetlane alfabetycznie w formie listy.

Otwieranie aplikacji

Aplikację należy otworzyć wybierając ją z listy i wciskając przycisk OK.

Zamykanie aplikacji

Do zamykania aplikacji służy przycisk Wstecz na pierwszej stronie aplikacji. Jeśli aplikacja zostanie zamknięta przy pomocy przycisku Home lub gdy nastąpi przekierowanie do innej funkcji telefonu, aplikacja będzie nadal działać w tle.

Warto wiedzieć: aplikacje działające w tle będą widoczne po długim wciśnięciu przycisku Home.

Z poziomu tego ekranu można:

- Zamknąć aplikację

- Powrócić do otwartej uprzednio aplikacji
- Uzyskać szybki dostęp do paska wyszukiwania Google

W celu zoptymalizowania czasu gotowości SmartVision2, zalecane jest zamykanie co jakiś czas aplikacji działających w tle, z których się nie korzysta.

Zamknięcie działających w tle aplikacji następuje także po zrestartowaniu telefonu.

Wyszukiwanie aplikacji

Wyszukiwanie aplikacji następuje po wpisaniu na klawiaturze fizycznej pierwszych liter nazwy aplikacji. Lista aplikacji zostanie następnie przefiltrowana według wpisanych liter. Listę przefiltrowanych aplikacji można przeglądać przy pomocy strzałek.

Usunięcie wpisanych liter następuje po wciśnięciu przycisku Usuń.

Pobieranie aplikacji

SmartVision2 jest dostarczany z zestawem preinstalowanych aplikacji. Użytkownik może także pobierać inne programy przy pomocy aplikacji Sklep Play.

Odinstalowywanie aplikacji

Odinstalowanie zbędnej aplikacji nastąpi po jej wybraniu z listy, długim przytrzymaniu przycisku OK

i wybraniu pozycji Odinstaluj z menu kontekstowego.

Warto wiedzieć: Aplikacje domyślnie zainstalowane przez producenta SmartVision2 nie mogą być odinstalowane.

Powiadomienia

Powiadomienia służą do informowania użytkownika o zdarzeniach typu nadejście nowej wiadomości, nieodebrane połączenie lub spotkanie utworzone w kalendarzu. Wszystkie powiadomienia z telefonu są pogrupowane w panelu powiadomień. By otworzyć panel powiadomień, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Wstecz.

Zarządzanie powiadomieniami

Wyświetlanie powiadomień

Po otwarciu ekranu powiadomień należy użyć klawisza nawigacyjnego, by wybrać zdarzenie. Wcisnąć przycisk OK, w celu otwarcia powiadomienia i przekierowania do aplikacji.

Przykład: Jeśli będzie to powiadomienie o nieodebranym połączeniu, nastąpi automatyczne przekierowanie do aplikacji Historia połączeń.

Po otwarciu powiadomienia zniknie ono z ekranu powiadomień.

Warto wiedzieć: Powiadomienia dotyczące błędów są usuwane dopiero po rozwiązaniu problemu.

Usuwanie wszystkich powiadomień

By usunąć wszystkie powiadomienia, należy otworzyć ekran powiadomień i wybrać z listy element Usuń wszystkie powiadomienia.

Warto wiedzieć: Ekran powiadomień wyświetla ograniczoną liczbę zdarzeń. Niekiedy konieczne jest użycie ekranu dotykowego do przewijania wszystkich powiadomień.

W takim przypadku należy przytrzymać dwa palce na ekranie i przesunąć je w górę. By przejrzeć nowe powiadomienia, trzeba ponownie użyć panelu nawigacyjnego.

Szybkie ustawienia

Dostęp do ekranu Szybkie ustawienia uzyskuje się wybierając pierwszy element z panelu powiadomień, zawierający informacje o stanie telefonu (godzina, data, poziom odbioru Wi-Fi, poziom naładowania baterii) i wciskając przycisk OK.

Ekran ten umożliwia szybki dostęp do następujących parametrów:

- Bateria: uzyskiwanie dostępu do ustawień zarządzania baterią
- Ustawienia: uzyskiwanie dostępu do ogólnych ustawień SmartVision2
- Wyświetl profil: uzyskiwanie dostępu do profilu użytkownika
- Jasność ekranu: regulowanie jasności ekranu
- Wi-Fi: włączanie, wyłączanie i łączenie się z siecią Wi-Fi
- Bluetooth: włączanie, wyłączanie i łączenie się z urządzeniem bluetooth
- Tryb Nie przeszkadzać: włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać
- Użycie danych: uzyskiwanie dostępu do ustawień użycia danych
- Dane połączenia: uzyskiwanie dostępu do danych połączenia
- Tryb samolotowy: włączanie i wyłączanie trybu samolotowego
- Obróć ekran: umożliwia zablokowanie orientacji ekranu w trybie portretu (pionowym)
- Latarka: włączanie tylnych diod LED
- Lokalizacja: włączanie i wyłączanie usługi lokalizacji Google
- Strumieniowanie: umożliwia wyświetlanie zawartości ekranu SmartVision2 na ekranie telewizora
- Profile dźwięków: dostosowywanie profili dźwięków SmartVision2 (tryb ogólny, tryb cichy, spotkanie, na zewnątrz)

Book Reader

Book Reader to aplikacja przeznaczona do głosowego odczytywania dokumentów w formatach Word, Daisy, Epub, PDF, TXT, HTML oraz XML.

Import dokumentów

Import dokumentów do SmartVision2 odbywa się w połączeniu urządzenia z komputerem przy pomocy kabla USB. Po połączeniu SmartVision2 z komputerem można przenosić pliki dokumentów do folderu Books, znajdującego się w pamięci wewnętrznej smartfonu. W celu rozszerzenia możliwości importowania plików multimedialnych, SmartVision2 można wyposażyć w kartę pamięci micro SD. Folder Books powinien wówczas być utworzony także na karcie SD i do tego folderu można następnie dodawać pliki multimedialnych.

Ekran główny

Po uruchomieniu aplikacji dostępne są następujące opcje:

- **Wznawianie odtwarzania:** opcja ta umożliwia wznowienie odtwarzania ostatniego dokumentu od miejsca, w którym zostało przerwane
- **Półka z książkami:** opcja ta umożliwia wyszukiwanie i czytanie książek zapisanych w pamięci SmartVision2
- **Ulubione:** opcja ta umożliwia uzyskanie szybkiego dostępu do książki umieszczonej w zakładce Ulubione

- **Ostatnio czytane:** wybranie tej opcji udostępnia czytanie ostatnio wybranego dokumentu
- **Nagrywanie w formacie Daisy:** wybranie tej opcji spowoduje przetworzenie pliku audio na format Daisy.

Na ekranie głównym dostępne są także opcje dodatkowe wybierane przy pomocy przycisku Menu.

- **Wyciszenie podczas wychodzenia:** opcja ta zatrzymuje czytanie dokumentu podczas wychodzenia z aplikacji przy użyciu przycisku Home
- **Kolory:** opcja ta udostępnia wybór koloru tekstu i tła w trakcie czytania dokumentu
- **Prędkość:** opcja ta umożliwia zmianę prędkości odtwarzania dokumentu
- **Wysokość tonu:** wybranie tej opcji umożliwia zmianę wysokości tonu odczytywanego dokumentu (działa jedynie w przypadku plików MP3)
- **Odcinek czasu:** opcja ta umożliwia ustawienie odcinka czasu przewijania
- **Odtwarzanie zapętlone:** opcja umożliwia odtwarzanie dokumentu w pętli

Czytanie dokumentu

Po wybraniu Półki z książkami z poziomu głównego ekranu aplikacji do dyspozycji są następujące opcje:

- **Książki według tytułów:** opcja ta umożliwia wybieranie dokumentów według tytułów
- **Książki według autorów:** wybranie tej opcji umożliwia przeszukiwanie dokumentów według nazwisk autorów
- **Wybór według formatów:** opcja ta umożliwia przeszukiwanie dokumentów według formatów
- **Przeglądanie drzewa plików:** opcja ta umożliwia swobodne przeglądanie folderu Książki w poszukiwaniu dokumentu.

Po wybraniu dokumentu automatycznie rozpocznie się jego odtwarzanie.

Podczas odtwarzania dostępne są poniższe skróty klawiszowe:

- **Klawisz 1:** poprzednia sekcja
- **Klawisz 2:** następna sekcja
- **Klawisz 4:** zmniejsza poziom nawigacji (strona, tytuł, rozdział, linia, słowo, znak, odcinek czasu)
- **Klawisz 5:** zwiększa poziom nawigacji (strona, tytuł, rozdział, linia, słowo, znak, odcinek czasu)
- **Klawisz 7:** szybkie przewijanie do tyłu (jedynie w przypadku plików MP3)
- **Klawisz 8:** szybkie przewijanie do przodu (jedynie w przypadku plików MP3)

Podczas odtwarzania dostępne są dodatkowe opcje uruchamiane przy użyciu przycisku Menu:

- **Tryb nawigacji:** wybranie tej opcji umożliwia zmianę poziomu nawigacji według tytułów stron, według rozdziałów, linii, słów, znaków, odcinków czasu. Opcje w tym trybie zależne są od odtwarzanego dokumentu.
- **Tworzenie zakładki:** opcja ta umożliwia tworzenie zakładki w bieżącej pozycji odczytywanego pliku
- **Przejdź do ...:** opcja ta umożliwia przeglądanie dokumentu od początku, według tytułów, według znaczników i według procentów
- **Gdzie jestem?:** wybranie tej opcji udostępnia informacje na temat książki i miejsca czytania

- **Tryb audio:** opcja ta udostępnia odczytywanie nazw plików MP3 przez syntezytor mowy SmartVision2
- **Ustawienia:** wybranie tej opcji przenosi użytkownika do Opcji ogólnych aplikacji.

Zarządzanie ulubionymi

Dodawanie dokumentu do listy ulubionych

Z poziomu Półki z książkami należy wybrać żądany plik i wcisnąć przycisk OK. Pojawi się wówczas związane z wybranym elementem menu kontekstowe, z którego trzeba wybrać Ulubione, po czym dodać dokument do listy ulubionych.

Usuwanie dokumentu z listy ulubionych

Po wybraniu pliku z listy Ulubionych trzeba wcisnąć i przytrzymać przycisk OK. Pojawi się wówczas związane z wybranym elementem menu kontekstowe, z którego należy wybrać Ulubione i usunąć plik z listy ulubionych.

Tworzenie książki Daisy

Tworzenie nowej książki Daisy

Z poziomu głównego ekranu aplikacji należy wybrać Nagrywanie książki Daisy, po czym Nowa książka. Po wybraniu miejsce przechowywania książki audio w pamięci telefonu lub na karcie SD, wpisać tytuł i autora książki.

Wybrać Tworzenie nowego nagrania oraz Nagrywanie.

W celu zatrzymania nagrania wybrać Pauzę.

Po zakończeniu nagrania wcisnąć Stop w celu zachowania nowego audiobooka i powrócić do głównego ekranu aplikacji.

Warto wiedzieć: Po wybraniu opcji Dodaj do już istniejącego nagrania, do uprzednio nagranej na SmartVision2 książki można dodać plik audio.

Dodawanie nagrania audio do istniejącego audiobooka

Z poziomu głównego ekranu aplikacji trzeba wybrać Nagrywanie książki Daisy, po czym Dodaj do książki. Wybrać audiobook, do którego ma być dodane nowe nagranie,

wcisnąć Utwórz nowe nagranie, po czym przycisk Nagrywanie.

W celu zatrzymania nagrania wybrać Pauzę.

Po zakończeniu nagrywania wcisnąć Stop w celu zachowania nowego audiobooka i powrócić do głównego ekranu aplikacji.

Kalkulator

Aplikacja ta wykonuje podstawowe operacje matematyczne - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wykonywanie podstawowych obliczeń

Podczas korzystania z Kalkulatora przyciski klawiatury mają następujące funkcje:

- Klawisze od 0 do 9 umożliwiają wpisywanie cyfr
- Klawisz gwiazdki umożliwia wybranie mnożenia, dzielenia, plus, minus, przecinka i kropki
- Przycisk OK zatwierdza operację i oznajmia wynik

- Przycisk Usuń umożliwia usunięcie ostatnio wpisywanej cyfry lub ostatnio wybieranej operacji
- Klawiatura nawigacyjna z przyciskami strzałek w górę, w dół, w lewo i w prawo umożliwia nawigację po cyfrach i operatorach wyświetlanych na ekranie

Warto wiedzieć: W przypadku skomplikowanych operacji, takich jak obliczanie sinus, cosinus i logarytmów, itp., należy wcisnąć przycisk Menu i wybrać Panel zaawansowany. Należy następnie użyć klawiszy nawigacyjnych, by wybrać bardziej złożone operatory - sinus, cosinus, styczną, pierwiastek kwadratowy, silnia, itp., po czym wpisać żądane cyfry. Na zakończenie, w celu potwierdzenia operacji trzeba wcisnąć przycisk OK.

Kalendarz

Kalendarz jest standardową aplikacją Google umożliwiającą tworzenie wydarzeń i skojarzonych z nimi przypomnień.

Prosimy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika Google dostępnym po kliknięciu w poniższe łącze w celu uzyskania informacji na temat działania Kalendarza.

[Łącze do Kalendarza Google](#)

Kamera

Aplikacja ta umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów przy użyciu wbudowanych kamer - przedniej i tylnej.

Wykonywanie zdjęć

Zdjęcie wykonujemy wybierając przycisk Migawka, znajdujący się w dolnej części ekranu i wciskając przycisk OK. Po przechwyceniu obrazu generowany jest dźwięk charakterystyczny dla migawki aparatu.

Wykonane zdjęcie można obejrzeć wybierając przycisk Ostatnio wykonane zdjęcie. Wszystkie zdjęcia można obejrzeć korzystając z aplikacji Zdjęcia Google.

Nagrywanie filmów

Filmy nagrywamy wybierając przycisk Migawka wideo, znajdujący się w dolnej części ekranu i wciskając przycisk OK. Ponowne wciśnięcie przycisku OK zatrzymuje nagrywanie.

Ostatnio nagrany film można odtworzyć wybierając przycisk Ostatnio wykonane zdjęcie. Wszystkie nagrane filmy można obejrzeć korzystając z aplikacji Zdjęcia Google.

Zmiana ustawień kamery

Zmian ustawień kamery dokonuje się po wybraniu przycisku Menu. Wśród tych ustawień znajdują się m.in. ekspozycja, balans bieli, likwidowanie efektu migotania. W kamerze można ponadto zastosować filtry, które są dostępne po wybraniu na ekranie przycisku Więcej ustawień.

Chrome

Chrome jest standardową przeglądarką internetową Google.

Prosimy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika Google dostępnym po kliknięciu

w poniższe łącze w celu uzyskania informacji na temat działania przeglądarki Chrome.

Łącze do Google Chrome.

Zegar

Zegar jest standardową aplikacją Google umożliwiającą ustawianie alarmów i sprawdzanie czasu. Aplikacja ta zawiera ponadto timer i chronometr.

Prosimy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika Google dostępnym po kliknięciu w poniższe łącze w celu uzyskania informacji na temat działania Zegara.

Łącze do Zegara Google.

Wykrywanie kolorów

Aplikacja do wykrywania kolorów korzysta z wbudowanej kamery i dwóch diod LED znajdujących się na frontowym panelu SmartVision2. Ten system oświetlenia został zaprojektowany w taki sposób, by poprawić wykrywanie kolorów i zwiększyć jego precyzję.

Oznajmianie kolorów

Na głównym ekranie aplikacji należy wybrać element Oznajmianie kolorów i ustawić SmartVision2 w odległości około 5 centymetrów od celu, po czym wcisnąć przycisk OK. Wykryty kolor zostanie oznajmiony, po czym rezultat wykrywania będzie okresowo powtarzany.

Znajdowanie koloru

Na głównym ekranie aplikacji należy wybrać element Znajdowanie koloru, wybrać kolor, który ma zostać wykryty, po czym ustawić SmartVision2 w odległości około 5 centymetrów od celu.

Wykrycie wybranego koloru będzie sygnalizowane dźwiękiem.

Kontakty

Aplikacja ta działa jako książka telefoniczna, w której znajdują się wszystkie kontakty użytkownika.

Tworzenie kontaktu

W celu utworzenia kontaktu z poziomu głównego ekranu aplikacji należy wybrać element Tworzenie nowego kontaktu. Pojawi się wówczas ekran Dodawanie nowego kontaktu, gdzie można wprowadzać dane kontaktowe - imię, nazwisko, telefon, adres email, adres, itp. Wprowadzone dane trzeba potwierdzić wciskając przycisk Zapisz, znajdujący się na dole ekranu.

Warto wiedzieć: po wciśnięciu przycisku Więcej, dostępne będą dodatkowe pola - zdjęcia kontaktu, notatki, strona internetowa kontaktu, itp.

Edycja kontaktu

W celu dokonania edycji kontaktu należy go wybrać z listy, wcisnąć i przytrzymać przycisk OK, po czym z menu kontekstowego wybrać pozycję Edycja.

Zakładka kontaktu znajdzie się wówczas w trybie edycji. Potwierdzenie zmian wykonuje się wciskając przycisk Zapisz, znajdujący się na górze ekranu.

W trybie edycji, z poziomu menu dostępne są dodatkowe opcje:

- Zapisywanie: umożliwia zachowanie dokonanych zmian.
- Odrzucanie zmian: umożliwia usunięcie dokonanych zmian.
- Usuwanie: usuwa kontakt.
- Oddzielanie: umożliwia rozdzielenie dwóch połączonych kontaktów.
- Łączenie: umożliwia łączenie dwóch kontaktów.
- Ustawianie dzwonka: umożliwia przypisanie dzwonka do kontaktu.
- Wszystkie połączenia z pocztą głosową: umożliwia przekierowywanie na pocztę głosową wszystkich połączeń przychodzących od określonego kontaktu.

Usuwanie kontaktu

W celu usunięcia kontaktu trzeba wybrać go z listy, wcisnąć i przytrzymać przycisk OK, po czym wybrać z menu kontekstowego pozycję Usuwanie. Czynność usuwania należy potwierdzić wybierając przycisk Tak.

Ulubione kontakty

Ustawianie kontaktu jako ulubionego

W celu ustawienia kontaktu jako ulubionego trzeba wybrać go z listy, wcisnąć i przytrzymać klawisz OK, zaznaczyć pole Ulubione z poziomu menu kontekstowego i ponownie nacisnąć klawisz OK.

Usuwanie kontaktu z Ulubionych

W celu usunięcia kontaktu z Ulubionych należy wybrać go z listy, wcisnąć i przytrzymać klawisz OK, odznaczyć pole Ulubione z poziomu menu kontekstowego i ponownie nacisnąć klawisz OK.

Warto wiedzieć: Można ponadto usunąć kontakt bezpośrednio z aplikacji Telefon lub Wiadomości.

Wyszukiwanie kontaktu

Kontakty są wyświetlane w porządku alfabetycznym na ekranie głównym aplikacji Kontakty. Do przewijania listy kontaktów oraz do ich przeglądania służą klawisze nawigacyjne.

Dostępne jest ponadto szybkie wyszukiwanie na liście przy pomocy klawiszy alfanumerycznych klawiatury fizycznej po wpisaniu nazwiska kontaktu. Lista kontaktów jest następnie filtrowana zgodnie z wprowadzonymi znakami. Lista przefiltrowanych kontaktów może być następnie przewijana przy pomocy klawiszy nawigacyjnych.

W celu usunięcia znaku z filtra należy wcisnąć przycisk Usuwanie.

Po odnalezieniu kontaktu, by wyświetlić szczegóły jego karty, trzeba nacisnąć przycisk OK.

Z poziomu tego ekranu można dzwonić do wybranego kontaktu, wybierając numer telefonu i naciskając przycisk OK.

Po wyświetleniu szczegółów kontaktu z poziomu przycisku Menu dostępne są następujące opcje dodatkowe:

- Dodaj do ulubionych: opcja ta umożliwia ustawianie kontaktu jako kontaktu ulubionego

- Edycja: opcja ta umożliwia modyfikowanie szczegółowych danych kontaktu
- Usuwanie: opcja ta umożliwia usunięcie kontaktu
- Współdzielenie: opcja ta umożliwia wysyłanie danych kontaktu via SMS, email, bluetooth...
- Umieszczanie na ekranie głównym: opcja ta umożliwia dodawanie kontaktu do ekranu głównego

Dodawanie kontaktu do ekranu głównego

Wizytówka kontaktu może być dodana bezpośrednio do ekranu głównego, dzięki czemu uzyskuje się szybki dostęp do kontaktu.

W tym celu kontakt należy wybrać z listy, wcisnąć i przytrzymać przycisk OK, po czym wybrać z menu kontekstowego element Umieść na ekranie głównym.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

W celu wykonania operacji importowania i eksportowania na ekranie głównym aplikacji trzeba wcisnąć przycisk Menu i wybrać element Import / Eksport. Dostępne będą wówczas następujące opcje:

- Importowanie z pliku VCF: opcja ta umożliwia importowanie pliku VCF do pamięci wewnętrznej SmartVision2.
- Importowanie z karty SIM: opcja ta umożliwia importowanie kontaktów z karty SIM do wewnętrznej pamięci SmartVision2.
- Eksportowanie do pliku VCF: opcja ta umożliwia eksportowanie wszystkich kontaktów do pliku VCF oraz umieszczenie go w wewnętrznej pamięci SmartVision2.
- Współdzielenie widocznych kontaktów: opcja ta umożliwia współdzielenie widocznych kontaktów ze SmartVision2 za pośrednictwem wiadomości SMS, email, poprzez bluetooth, itp.

Parametry

Przy pomocy przycisku Menu na ekranie głównym można uruchomić następujące opcje dodatkowe:

- Wyświetlanie kontaktów: opcja ta umożliwia zarządzanie sposobem wyświetlania kontaktów.
- Import / eksport: opcja ta umożliwia importowanie i eksportowanie kontaktów.
- Konta: opcja ta umożliwia zarządzanie kontami pocztowymi skojarzonymi z kontaktami.
- Ustawienia: opcja ta umożliwia zmianę sposobu wyświetlania kontaktów.
- Usuwanie wszystkich kontaktów: opcja ta umożliwia usunięcie wszystkich kontaktów z wewnętrznej pamięci telefonu.
- Pomoc: opcja ta umożliwia wyświetlenie z Podręcznika użytkownika rozdziału "Kontakty" (bieżącego rozdziału).

Gmail

Gmail jest standardową aplikacją Google obsługującą odbieranie i wysyłanie wiadomości email.

Prosimy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika Google dostępnym po kliknięciu w poniższe łącze w celu uzyskania informacji na temat działania Gmail.

[Łącze do Google Gmail](#)

Radio FM

Aplikacja Radio FM umożliwia słuchanie stacji radiowych emitowanych w kraju zamieszkania użytkownika.

Słuchanie radia

Po podłączeniu słuchawek, które służą także jako antena, przy użyciu klawiszy nawigacyjnych można przeglądać następujące elementy dostępne na ekranie:

- Poprzednie radio: po wciśnięciu tego elementu można słuchać poprzedniej stacji radiowej
- Zmniejszanie częstotliwości: wciśnięcie tego przycisku umożliwia dostrojenie częstotliwości o jeden krok w dół
- Dodawanie do ulubionych: wciśnięcie tego przycisku umożliwia dodanie aktualnie słuchanej stacji radiowej do listy ulubionych
- Zwiększanie częstotliwości: wciśnięcie tego przycisku umożliwia dostrojenie częstotliwości o jeden krok w górę
- Następne radio: po wciśnięciu tego elementu można słuchać następnej stacji radiowej
- Odtwarzanie / zatrzymywanie radia FM: po wciśnięciu tego przycisku możliwe jest odtwarzanie i zatrzymywanie radia

Po wciśnięciu przycisku Menu dostępne będą następujące opcje dodatkowe:

- Radia: wciśnięcie tego przycisku udostępnia listę stacji radiowych FM emitowanych w otoczeniu użytkownika (lista jest odświeżana po wciśnięciu przycisków Menu i Odśwież)
- Rozpoczęcie nagrywania: przycisk ten umożliwia nagrywanie słuchanej stacji radiowej.
- Zapisane nagrania: przycisk ten umożliwia odtwarzanie uprzednio nagranych audycji radiowych

Warto wiedzieć: Stacje radiowe ustawione jako ulubione będą łatwo dostępne na końcu listy. Z tego poziomu, po wybraniu przycisku Więcej, możliwa jest zmiana nazwy stacji i jej usunięcie z listy ulubionych.

Kapten

Aplikacja Kapten to system nawigacyjny stworzony przede wszystkim dla osób z dysfunkcjami wzroku. Aplikacja bazuje na globalnym systemie pozycjonowania (GPS), który ułatwia podróż i zwiększa mobilność dzięki bogactwu funkcji, m.in. lokalizacji geograficznej, nawigacji i odkrywania map. Kapten umożliwia ponadto zapisywanie preferowanych punktów, które prowadzą użytkownika do wybranego miejsca. Preferowane punkty noszą nazwę znaczników K. Po pobraniu mapy dane Kapten są przechowywane w pamięci SmartVision2, dzięki czemu można korzystać z aplikacji bez połączenia z Internetem.

Zastrzeżenia

Kapten to asystent nawigacji bazujący na systemie pozycjonowania SmartVision2, przeznaczony przede wszystkim dla pieszych. Z aplikacji można jednak korzystać także w samochodzie.

Podczas sesji nawigacyjnej należy przestrzegać ostrzeżeń opisanych w niniejszym dokumencie. Niezależnie od trybu podróży polecenia nawigacyjne wydawane przez

aplikację Kapten nie powinny zwalniać użytkowników z obowiązku przestrzegania zasad ruchu drogowego i zachowywania się w sposób odpowiedzialny. Uwaga powinna być skupiona przede wszystkim na otoczeniu. Podczas podróży należy być czujnym i ostrożnym oraz szanować innych uczestników ruchu - pieszych, rowerzystów, motocyklistów i kierowców samochodów. Wykonując polecenia aplikacji Kapten użytkownicy powinni kierować się zdrowym rozsądkiem, obserwować znaki oraz geometrię chodników i ulic. Jeśli nie jest możliwe podążanie w kierunku wskazywanym przez aplikację Kapten, nawigacja automatycznie przeliczy trasę od nowej pozycji. Warto pamiętać, że aplikacja bazuje na systemie pozycjonowania smartfonu. Dokładność pozycjonowania jest uzależniona od siły sygnału GPS, który z kolei jest zależny od otoczenia, sposobu noszenia telefonu oraz od cyfrowych danych kartograficznych. Tak więc firma Kapsys nie gwarantuje, że instrukcje podawane przez system nawigacyjny będą dokładne.

Aplikacja Kapten nie będzie działała do momentu aktywowania funkcji GPS. Po uruchomieniu aplikacja upomni się o włączenie GPS, jeśli funkcja nie będzie aktywna.

Pobieranie map

Domyślnie w urządzeniu SmartVision2 nie są zainstalowane żadne mapy. Żądane mapy należy pobrać korzystając z połączenia internetowego. W celu pobrania mapy żadanego kraju trzeba wybrać ten kraj z listy i wcisnąć przycisk OK. Po zakończeniu pobierania należy ponownie uruchomić aplikację, by zainstalować nowe mapy.

Warto wiedzieć: pobrane mapy zostaną domyślnie zapisane w pamięci wewnętrznej SmartVision2. Lokalizację zapisanych map można zmienić przy pomocy opcji Zarządzanie mapami, znajdującej się w ustawieniach aplikacji.

Tryby nawigacji

Ekran główny aplikacji Kapten oferuje następujące tryby nawigacji:

- Nawigacja piesza: tryb ten zapewnia najbardziej zoptymalizowaną trasę pieszą
- Nawigacja samochodowa: tryb ten zapewnia najbardziej zoptymalizowaną trasę samochodową
- Kardynalne prowadzenie: tryb ten zapewnia wskazówki dotyczące kierunków, odległości i ograniczeń, po których następuje wskazanie czasu, niezależnie od natężenia ruchu.
- Katalog map: w trybie tym następuje odczytywanie mapy i wirtualne przemieszczanie się między kolejnymi skrzyżowaniami wraz z opisem każdego z nich.
- Zarządzanie znacznikami K: tryb ten umożliwia tworzenie, edycję i usuwanie znaczników K.
- Trasa piesza: tryb ten umożliwia nagranie trasy oraz jej późniejsze odtworzenie.
- Nawigacja swobodna: tryb ten umożliwia swobodną nawigację, udostępniając opis otoczenia w czasie rzeczywistym.

Nawigacja piesza i samochodowa

Bez względu na wybrany tryb nawigacji należy wybrać cel podróży, korzystając z wymienionych poniżej sugestii:

- Przejdź do elementu Nowy adres: ustawienie to podaje wskazówki dotyczące określonego adresu. Dostępne są tu dwie opcje wprowadzania danych:
 - Wprowadzanie głosowe: opcja ta umożliwia wprowadzenie adresu przy pomocy funkcji rozpoznawania mowy. By włączyć ten tryb i wprowadzić adres, na ekranie wprowadzania adresu trzeba wcisnąć przycisk sterowania głosem. Kapten wyświetli wówczas pasujące do wypowiedzianych zapytań sugestie, spośród których należy wybrać tę żadaną. Po dokonaniu wyboru rozpocznie się sesja nawigacyjna do żadanego celu.
 - Wprowadzanie przy użyciu klawiatury: umożliwia wprowadzenie adresu za pomocą klawiatury SmartVision2 w następującej kolejności: kraj, miasto, ulica, numer domu. Po wprowadzeniu różnych pól adresu docelowego, by go zatwierdzić, należy wcisnąć przycisk OK. W razie potrzeby można użyć centralnej konsoli nawigacyjnej SmartVision2, aby przewinąć listę sugestii zgodnych z żądaniem. Po wybraniu jednej z nich sesja nawigacji uruchomi się automatycznie.
- Przejdź do Nowy adres według kodu pocztowego: w tym przypadku należy wybrać miasto docelowe, wprowadzić kod pocztowy, nazwę ulicy i numer domu.
- Przejdź do Ostatnie punkty docelowe: w tym przypadku należy wybrać adres docelowy z listy Wybierz spośród ostatnich punktów docelowych. Można też usunąć listę Ostatnich punktów docelowych, co zostało opisane w sekcji Parametry.
- Przejdź do znacznika K: w tym przypadku należy wybrać kategorię, a następnie znacznik K, do którego zamierzamy przejść. Więcej informacji o znacznikach K znajduje się w rozdziale Znacznik K.
- Przejdź do POI: opcja ta umożliwia wybranie adresu POI:
 - według kategorii w pobliżu aktualnej pozycji
 - według kategorii w pobliżu aktualnego adresu
 - według nazwy blisko określonego adresu
- Przygotuj plan podróży: w tym przypadku należy wybrać adres startowy i adres docelowy, a Kapten przeliczy i wyznaczy najlepszą trasę dla wybranego trybu nawigacji. Obliczona trasa zostanie opisana jako książka drogowa. Należy się po niej poruszać przy pomocy konsoli nawigacyjnej i słuchać instrukcji nawigacyjnych dotyczących podróży.

Podczas nawigacji

Instrukcje są wyświetlane i oznajmiane w trakcie trwania podróży. Podczas nawigacji dostępne są też dodatkowe szczegóły związane z podróżą po naciśnięciu następujących klawiszy na klawiaturze:

- Klawisz 1: Gdzie jestem?
- Klawisz 2: Ostatnia instrukcja
- Klawisz 3: Następna instrukcja
- Klawisz 4: Bieżąca prędkość
- Klawisz 5: Ograniczenie prędkości
- Klawisz 6: Pozostała odległość
- Klawisz 7: POI
- Klawisz 8: Włącz / wyłącz nawigację swobodną
- Klawisz 9: Sygnał GPS

Następujące opcje dodatkowe są dostępne po wciśnięciu przycisku Menu:

- Następna instrukcja: podaje następną instrukcję nawigacyjną
- Ostatnia instrukcja: powtarza poprzednią instrukcję nawigacyjną
- Bieżący cel: podaje aktualne miejsce docelowe
- Czas przybycia: podaje czas przybycia
- Aktualny tryb nawigacji: umożliwia korzystanie z aktualnie używanego trybu nawigacji
- Przełącz do Trybu pieszego: przełącza do trybu nawigacji pieszej bez konieczności ponownego podawania adresu miejsca
- Przełącz na Tryb samochodowy: przełącza do nawigacji samochodowej bez ponownego wpisywania adresu docelowego
- Roadbook: aktywuje książkę drogową podczas nawigacji
- Zatrzymaj nawigację: zatrzymuje bieżącą sesję nawigacji
- Ustawienia: aktywuje menu ustawień
- Znaczniki K: aktywuje menu znaczników K
- Sygnał GPS: pokazuje siłę sygnału GPS
- Gdzie jestem: podaje bieżącą pozycję
- Bieżąca pozycja: podaje informacje o współrzędnych geograficznych w stopniach, minutach i sekundach, zaś wysokość w metrach
- Aktywuj nawigację swobodną: udostępnia tryb swobodnej nawigacji
- Zatrzymaj swobodną nawigację: zatrzymuje tryb swobodnej nawigacji
- Limit prędkości: określa limit prędkości dopuszczony na drodze
- Aktualna prędkość: podaje aktualną prędkość
- POI w pobliżu: wskazuje POI dowolnej kategorii wokół aktualnej pozycji
- Znaczniki K w pobliżu: wskazuje znaczniki K wokół aktualnej pozycji

Bezpośrednie prowadzenie:

Tryb Bezpośrednie prowadzenie dostarcza informacji w czasie rzeczywistym o odległości i kierunku do punktu docelowego. Dane w tym trybie obejmują skalkulowaną, najkrótszą odległość między dwoma punktami, nie uwzględniającą sieci dróg. Ten tryb nawigacji jest szczególnie przydatny do osiągnięcia punktu docelowego w drodze lub poza nią.

Uwaga: dostarczane w tym trybie informacje mają wyłącznie charakter poglądowy i nie uwzględniają topografii ani potencjalnych przeszkód w rodzaju rzek, mostów lub innych zagrożeń, na jakie mogą napotkać użytkownicy. Kapsys nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użycia tego trybu.

Tryb Bezpośrednie prowadzenie dostarcza następujących informacji:

- Orientacja według kierunków geograficznych od punktu docelowego do aktualnej pozycji, tj. północna, północno-wschodnia, wschodnia, południowo-wschodnia, południowa, południowo-zachodnia, zachodnia i północno-zachodnia
- Odległość od aktualnej pozycji do punktu docelowego, w metrach lub kilometrach
- Kierunek, jaki należy obrać, aby dotrzeć do miejsca docelowego. Informacja ta jest wyrażana w godzinach przy użyciu formatu pozycji zegara, od 1 do 12 godzin, w oparciu o ostatni znany kierunek.

Gdy tryb Bezpośrednie prowadzenie jest włączony, najkrótsza odległość do punktu docelowego oraz informacje o kierunku poruszania się podawane są w regularnych odstępach czasu.

Uwaga: aplikacja Kapten może dokładnie skalkulować kierunek tylko wtedy, gdy użytkownik jest w ruchu. Kiedy użytkownik pozostaje w jednym miejscu, Kapten podaje ostatni kierunek. Gdy aplikacja nie jest w stanie dostarczyć wiarygodnych informacji na temat kierunku, w którym należy podążać, aplikacja dodatkowo wyśle komunikat Brak informacji o kierunku. Oto przykład komunikatów trybu Bezpośrednie prowadzenie: punkt docelowy, północny-zachód na 250 metrach, proszę skręcić w prawo: punkt docelowy znajduje się 250 metrów w kierunku północno-zachodnim, należy skręcić w prawo.

Warto zwrócić uwagę, że tryb Bezpośrednie prowadzenie nie wyłącza się automatycznie po dotarciu do miejsca docelowego; należy wcisnąć przycisk Wstecz, by go zatrzymać.

Warto wiedzieć: W ustawieniach trybu Bezpośrednie prowadzenie (patrz ustawienia) można określić częstotliwość automatycznego powtarzania komunikatów, jak też ustawić włączanie lub wyłączanie trybu Bezpośrednie prowadzenie po zakończeniu nawigacji.

Eksplorowanie mapy

Funkcja ta pozwala odczytywać mapę i wirtualnie przechodzić od jednego skrzyżowania do następnego, na podstawie podawanego, szczegółowego opisu każdego skrzyżowania.

Wybieranie adresu początkowego z poniższych opcji:

- Aktualna pozycja rozpoczyna czytanie mapy od aktualnej pozycji
- Nowy adres: rozpoczyna czytanie mapy od nowego adresu
- Nowy adres według kodu pocztowego: rozpoczyna odczytywanie mapy od nowego adresu wprowadzonego jako kod pocztowy
- Ostatni cel: rozpoczyna odczytywanie mapy od jednego z ostatnio wprowadzonych miejsc docelowych
- Znacznik K: rozpoczyna odczytywanie mapy od zaznaczonego znacznika K
- POI: rozpoczyna odczytywanie mapy od wybranego punktu zainteresowania (POI)

Po wybraniu adresu z klawiatury nawigacyjnej należy wybrać kierunek poruszania się i kliknąć OK.

Aplikacja Kapten oznajmi wówczas nazwy ulic następnego skrzyżowania. Za pomocą klawiatury należy ponownie wybrać punkt skrzyżowania i wcisnąć przycisk OK, by potwierdzić kierunek poruszania się.

W ten sposób możliwe będzie eksplorowanie mapy, poruszając się od jednego skrzyżowania do następnego.

Trasa piesza

Funkcja ta umożliwia nagrywanie trasy lub podróży w celu późniejszej nawigacji.

Z poziomu tego ekranu można:

- Nagrać trasę.
- Odtworzyć trasę.
- Odtworzyć trasę.

- Usunąć trasę.

Nagrywanie trasy

By rozpocząć nagrywanie trasy, należy wybrać Nagraj trasę i wcisnąć przycisk OK. Od tej chwili pozycja GPS będzie rejestrowana w regularnych odstępach czasu w celu utworzenia trasy.

Należy wcisnąć przycisk Wstecz, by zatrzymać nagrywanie trasy.

Po zakończeniu nagrywania można zmienić nazwę trasy, by łatwiej było ją odnaleźć. Domyślnie nazwa trasy ma następujący format: trasa + data + czas

Warto wiedzieć: nie można nagrywać trasy poza mapą. Jeśli użytkownik wybierze trasę poza mapą, aplikacja Kaptén ustawi użytkownika na najbliższej ulicy względem jego aktualnej lokalizacji.

Uwaga: Nagrywanie trasy ma status nawigacji, nie można więc wykonywać innej nawigacji jednocześnie.

Odtwarzanie trasy

Należy w tym celu wybrać Odtwórz trasę, po czym z dostępnych tras wybrać tę, która ma być ponownie odtworzona.

Trasy są posortowane w porządku chronologicznym. Po wybraniu kursu można nim podążać w kierunku zgodnym z zarejestrowaną trasą lub w kierunku przeciwnym.

Edytowanie trasy

Należy w tym celu wybrać Edytuj trasę, po czym z dostępnych tras wybrać tę, której nazwa ma być zmieniona.

Wprowadzić nową nazwę trasy i zatwierdzić zmianę przyciskiem OK.

Usuwanie trasy

Należy w tym celu wybrać Usuń trasę, po czym wybrać tę, która ma być usunięta.

Zarządzanie znacznikami K

Aplikacja Kaptén posiada funkcję znacznik K, która umożliwia geotagowanie lokalizacji, czyli zapisywanie pozycji z powiązanymi z nią informacjami.

Znaczniki K są używane głównie jako cel nawigacji. Zbliżanie się do znacznik K może być ponadto oznajmiane w trybie Swobodnej nawigacji.

Znacznik K jest zatem znacznikiem geograficznym, który zawiera następujące elementy:

- Położenie geograficzne lub adres
- Notatkę głosową do identyfikacji znacznika K
- Kategorię
- Atrybut Ulubione dla szybkiego dostępu do celu nawigacji

Z poziomu tego ekranu można:

- Utworzyć znacznik K.
- Modyfikować znacznik K.
- Usunąć znacznik K.

Tworzenie znacznika K

W tym celu na ekranie Zarządzaj znacznikiem K należy wybrać Utwórz znacznik K, a następnie wybrać pozycję z listy:

- Aktualna pozycja: umożliwia utworzenie nowego znacznika K z aktualnej pozycji
- Nowy adres: umożliwia utworzenie nowego znacznika K z wprowadzonego adresu.
- Współrzędne: umożliwia utworzenie nowego znacznika na podstawie szerokości i długości geograficznej.

Po zdefiniowaniu położenia geograficznego znacznika K można nadać mu nazwę. Domyślnie adres znacznika K jest używany jako nazwa. Po ustawieniu nazwy znacznika K należy nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić wpis i przejść do następnego kroku.

By powiązać znacznik K z kategorią, można skorzystać z listy różnych kategorii znacznika K:

- Ulubione
- Kontakt
- Hotel i restauracja
- Transport
- Zdrowie
- Usługi
- Zakupy
- Czas wolny
- Turystyka
- Sport
- Auto – Moto
- Różnorodne

Modyfikowanie znacznika K

W tym celu z ekranu Zarządzaj znacznikiem K należy wybrać Edytuj znacznik K, a następnie kategorię znacznika K, która ma być zmieniona.

Po wybraniu znacznika K można zmienić kategorię lub zmienić nazwę znacznika K. Należy wybrać opcję i wprowadzić niezbędne zmiany, postępując zgodnie z sugerowanymi krokami.

Usuwanie znacznika K

W tym celu z ekranu Zarządzaj znacznikiem K należy wybrać Usuń znacznik K, a następnie kategorię znacznika K, która ma być usunięta.

Swobodna nawigacja

Tryb ten pozwala uzyskać opis otoczenia w czasie rzeczywistym. Po włączeniu tej funkcji aplikacja Kapten oznajmi ulicę, na której znajduje się użytkownik i opis następnego skrzyżowania.

Po dotarciu do skrzyżowania aplikacja Kapten opisze je, podając nazwy ulic tworzących skrzyżowanie, zaś po minięciu skrzyżowania oznajmiona zostanie następna ulica, do której zmierza użytkownik.

Domyślnie swobodna nawigacja jest aktywowana automatycznie przy każdym uruchomieniu nawigacji. Można jednak aktywować lub dezaktywować ją na ekranie głównym aplikacji Kapten lub naciskając przycisk Menu.

Swobodną nawigację można ustawiać, by np.:

- Oznajmiała przydatne adresy ze znacznikiem K w sąsiedztwie
- Automatycznie powtarzała swobodne komunikaty nawigacyjne

Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Ustawienia aplikacji Kapten.

Ustawienia

W sekcji tej opisano, w jaki sposób skonfigurować aplikację Kapten. Aby uzyskać dostęp do opcji, należy wcisnąć przycisk Menu i wybrać element Ustawienia.

Różne parametry aplikacji Kapten zostały pogrupowane w kategorie:

- Systemowe: umożliwia modyfikowanie parametrów systemu
- Mapy: umożliwia pobieranie i aktualizację map
- Nawigacja piesza: umożliwia zmianę parametrów związanych z trybem nawigacji pieszej
- Nawigacja samochodowa: umożliwia zmianę ustawień związanych z trybem nawigacji samochodowej
- Nawigacja swobodna: umożliwia zmianę ustawień związanych z trybem nawigacji swobodnej
- Nawigacja swobodna: umożliwia zmianę ustawień związanych z trybem nawigacji swobodnej

Ustawienia menu System

- Jednostki miary: określa jednostki odległości i prędkości używane w instrukcjach nawigacji (metrycznych oraz imperialnych)
- Usuń ostatnie cele: czyści adresy wybrane z listy poprzednich podróży
- Przywróć ustawienia domyślne: przywraca ustawienia domyślne aplikacji Kapten.

Ustawienia menu Mapy

- Pobierz mapy: umożliwia pobranie nowych map dla aplikacji Kapten
- Aktualizuj mapy: umożliwia aktualizację preinstalowanych map
- Miejsce przechowywania: pozwala modyfikować lokalizację przechowywania map (pamięć wewnętrzna lub karta SD)

Ustawienia menu Nawigacja piesza

- Automatyczne powtarzanie instrukcji: definiuje upływ czasu pomiędzy komunikatami nawigacyjnymi (brak, 1, 3, 5 lub 10 minut)
- Wskazanie godziny: włącza lub wyłącza wskazanie godziny w instrukcjach dotyczących manewrów

Ustawienia menu Nawigacja samochodowa

- Parametr obliczania trasy: określa kryteria wykorzystywane do obliczania trasy (najszybsza, najkrótsza)
- Włącz autostrady: określa obliczanie trasy z autostradami lub bez nich
- Zezwalaj na drogi płatne: określa obliczanie trasy z drogami płatnymi lub bez nich
- Automatyczne powtarzanie instrukcji: określa czas pomiędzy odtwarzaniem komunikatów nawigacyjnych (brak, 1, 3, 5 lub 10 minut)

Ustawienia menu Swobodna nawigacja

- Oznajmianie POI: wybiera i wyświetla kategorię POI, która zostanie oznajmiona, gdy użytkownik zbliży się do takiego punktu.

- Oznajmianie znaczników K: wybiera i wyświetla różne kategorie znaczników K, które zostaną oznajmione, gdy użytkownik znajdzie się w pobliżu określonych lokalizacji.
- Typ oznajmiania: określa tryb oznajmiania POI lub znaczników K, gdy jedno z nich znajduje się w pobliżu (brak powiadomienia, alert dźwiękowy lub komunikat głosowy)
- Informacje o kierunku kardynalnym włącza lub wyłącza główne komunikaty o kierunku aktualnej drogi
- Automatyczne powtarzanie instrukcji: określa czas pomiędzy odtwarzaniem komunikatów pieszej nawigacji (brak, 1, 3, 5 lub 10 minut)

Ustawienia menu Bezpośrednie prowadzenie

- Automatyczne powtarzanie instrukcji: określa czas pomiędzy odtwarzaniem komunikatów nawigacyjnych bezpośredniego prowadzenia (brak, 1, 3, 5 lub 10 minut)
- Bezpośrednie prowadzenie po osiągnięciu celu: włącza lub wyłącza automatyczne przełączanie na Bezpośrednie prowadzenie po zakończeniu sesji nawigacji pieszej lub samochodowej.

Detektor światła

Aplikacja ta powiadamia o poziomie jasności wykrytym przez czujnik światła znajdujący się w górnej części tylnego panelu SmartVision2.

Jak wykryć poziom jasności?

W celu wykrycia poziomu jasności należy skierować tylny panel telefonu w żądanym kierunku. W zależności od poziomu jasności odbieranego przez czujnik SmartVision2 generuje dźwięk.

Rodzaj sygnału dźwiękowego można wybrać z Menu.

Po wybraniu opcji dźwięku sygnał zmienia częstotliwość w zależności od poziomu jasności. Oświetlone otoczenie generuje dźwięki o wysokiej częstotliwości, zaś ciemne - dźwięki o niższej częstotliwości.

Można też wybrać opcję procentowego oznajmiania jasności. Oświetlone otoczenie to wyższa wartość w procentach, a ciemne - niższa.

Wideo powiększalnik

Aplikacja Video Magnifier umożliwia powiększanie tekstu lub dokumentów i dostosowanie ich rozmiaru do potrzeb użytkownika. Korzystając z tylnej kamery aplikacja zapewnia różne poziomy powiększania i kontrastu kolorów.

Powiększanie tekstu

W celu powiększenia tekstu, SmartVision2 należy umieścić nad tekstem i wyregulować odległość zapewniającą ostry obraz. Używając klawiszy 2 i 3 na fizycznej klawiaturze, można zwiększać lub zmniejszać poziom powiększenia.

Inne opcje to:

- Wciśnięcie 1 włącza oświetlenie
- Wciśnięcie gwiazdki odświeża ekran
- Wciśnięcie 0 umożliwia wykonanie zdjęcia i zapisanie go w galerii
- Wciśnięcie kratki umożliwia wybieranie spośród 9 kolorów kontrastowych

Powyższe opcje są również dostępne przy użyciu przycisku Menu.

Wiadomości

Aplikacja ta umożliwia wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości SMS lub MMS (wiadomości tekstowych zawierających element multimedialny).

Wysyłanie wiadomości

By wysłać wiadomość SMS lub MMS, z głównego ekranu aplikacji należy wybrać przycisk Nowa wiadomość, po czym wybrać odbiorcę wiadomości, korzystając z następujących opcji:

- Ulubione: opcja ta umożliwia wybranie kontaktu zapisanego jako ulubiony
- Kontakty: opcja ta umożliwia wybranie kontaktu z listy kontaktów
- Ręczne wybieranie numeru: opcja ta umożliwia ręczne wpisanie numeru odbiorcy wiadomości

Po wybraniu odbiorcy w polu edycyjnym należy wpisać treść wiadomości i potwierdzić wysłanie wiadomości, wybierając przycisk Wyślij znajdujący się na końcu listy.

Po wybraniu przycisku Menu, dostępne będą dodatkowe, niżej wymienione opcje:

- Przeglądanie kontaktu: opcja ta umożliwia wyświetlenie wizytówki kontaktu
- Zadzwoń: opcja ta umożliwia dzwonienie do kontaktu
- Dodawanie nowego odbiorcy: opcja ta umożliwia wybranie dodatkowego odbiorcy
- Wstawianie krótkiego tekstu: opcja ta umożliwia wstawienie do wiadomości krótkiego tekstu
- Wstawianie kontaktu: opcja ta umożliwia wstawienie do wiadomości wizytówki kontaktu
- Dodawanie tematu: opcja ta umożliwia wstawienie tytułu wiadomości
- Załącznik: opcja ta umożliwia dodanie do wiadomości załącznika w postaci zdjęcia, pliku wideo, pliku audio lub kontaktów.

Odczytywanie wiadomości

Otrzymanie wiadomości jest sygnalizowane w panelu powiadomień i w aplikacji Wiadomości.

W celu odczytania wiadomości należy otworzyć aplikację Wiadomości i przejrzeć wszystkie wiadomości, korzystając z klawisza nawigacyjnego na klawiaturze.

Wysłane i odebrane wiadomości są prezentowane w porządku chronologicznym, najnowsze wiadomości znajdują się na górze listy.

Podczas przeglądania otrzymanych i wysłanych wiadomości tylko ostatnia z nich jest oznajmiana. Wciśnięcie przycisku OK umożliwia przeglądanie historii wszystkich wiadomości.

Usuwanie wiadomości

W celu usunięcia wiadomości należy ją wybrać i długo przytrzymać przycisk OK, po czym wybrać opcję Usuń z wyskakującej listy menu i usunąć wiadomość.

Parametry

Po wciśnięciu przycisku Menu na głównym ekranie aplikacji Wiadomości, można uzyskać dostęp do następujących parametrów:

- Wyszukiwanie: umożliwia wyszukiwanie wiadomości w telefonie
- Usuwanie wszystkich wątków: umożliwia usunięcie wszystkich SMS-ów i MMS-ów w tym wątków (konwersacji)
- Parametry:
 - Wiadomości tekstowe (SMS): umożliwia konfigurowanie opcji wiadomości tekstowych
 - Wiadomości multimedialne (MMS): umożliwia konfigurowanie opcji wiadomości multimedialnych
 - Powiadomienia: aktywuje dzwonek i / lub wibrację po nadejściu nowej wiadomości
 - Ogólne: umożliwia ustawienie czcionki wiadomości, limitów odbioru SMS-ów i MMS-ów oraz limitu przesyłu danych (transmisji komórkowej)
- Pomoc: umożliwia zapoznanie się z rozdziałem Wiadomości podręcznika użytkownika.

NFC

Technologia NFC (Near Field Communication) umożliwia skomunikowanie się SmartVision2 z innym urządzeniem, np. smartfonem wyposażonym w elektroniczny znacznik NFC, poprzez ich zbliżenie do siebie.

Technologia NFC może także służyć do udostępniania kontaktów, zdjęć i filmów. SmartVision2 umożliwia ponadto programowanie i odczytywanie znaczników NFC oraz wykonywanie skojarzonych z nimi czynności.

Przypisywanie czynności do elektronicznych znaczników NFC

By przypisać czynność do znacznika NFC na początek należy wybrać informacje, które mają zostać wprowadzone do znacznika NFC. Powiązana z informacją czynność zostanie wykonana, gdy tylko SmartVision2 rozpozna znacznik. Dostępne będą wówczas następujące opcje:

- Wybieranie numeru: opcja ta umożliwia powiązanie numeru telefonu z kontaktem, które spowoduje wywołanie dzwonienia do tego kontaktu
- Ustawienia profilu: opcja ta umożliwia skojarzenie znacznika NFC z ustawieniami telefonu - Wi-Fi, bluetooth, tryb samolotowy, dzwonek - oraz ich późniejsze aktywowanie
- Aplikacja: opcja ta umożliwia skojarzenie znacznika NFC z aplikacją i jej późniejsze aktywowanie
- Zakładka przeglądarki internetowej: opcja ta umożliwia skojarzenie znacznika NFC z łączem internetowym i przeglądanie przypisanej do łącza strony przy pomocy przeglądarki
- Tekst: opcja ta umożliwia wpisanie tekstu do znacznika NFC i jego późniejsze odczytanie głosem
- Ustawienia Wi-Fi: opcja ta umożliwia skojarzenie znacznika NFC z ustawieniami sieci Wi-Fi - nazwą i hasłem i późniejsze, automatyczne łączenie się z tą siecią Wi-Fi.
- Notatka głosowa: opcja ta umożliwia skojarzenie znacznika NFC z notatką głosową oraz jej późniejsze odsłuchiwanie.

Warto wiedzieć: Ze znaczników NFC można korzystać wielokrotnie.

Zapamiętywanie nowych informacji w znaczniku NFC powoduje usuwanie informacji wcześniej zapamiętanych.

Odczytywanie znaczników NFC

By odczytać znacznik NFC wystarczy umieścić tylny panel smartfonu na znaczniku. SmartVision 2 zainicjuje komunikację ze znacznikiem i wykona czynność z nim skojarzoną na jeden ze sposobów opisanych powyżej.

Notatki

Aplikacja Notatki umożliwia tworzenie notatek tekstowych, ich edycję, usuwanie i odczytywanie.

Tworzenie notatki

By utworzyć notatkę tekstową, należy wybrać element Nowa notatka, znajdujący się na górze ekranu, po czym wprowadzić tekst i zapisać notatkę, wybierając przycisk Potwierdź, znajdujący się na dole ekranu.

Zapisana notatka stanie się wówczas dostępna do odczytywania z poziomu głównego ekranu aplikacji Notatki.

Notatki są posortowane w porządku chronologicznym, najnowsze znajdują się na górze listy.

Odczytywanie notatki

Na ekranie głównym aplikacji Notatki należy wybrać notatkę, która ma być odsłuchana, po czym wcisnąć przycisk OK w celu otwarcia zaawansowanego trybu odtwarzania.

Zaawansowany tryb odtwarzania umożliwia korzystanie z fizycznej klawiatury, przy pomocy której można przeglądać notatki w następujący sposób:

- Klawisz 1: odczytuje znak na lewo od bieżącej pozycji
- Klawisz 2: odczytuje znak na prawo od bieżącej pozycji
- Klawisz 4: odczytuje słowo na lewo od bieżącej pozycji
- Klawisz 5: odczytuje słowo na prawo od bieżącej pozycji
- Klawisz 7: umożliwia powrót do początku notatki
- Klawisz 8: umożliwia dotarcie do końca notatki

Pozostałe opcje są dostępne po wciśnięciu przycisku Menu podczas czytania notatki. Oto one:

- Edytuj: otwiera tryb edycji umożliwiający modyfikowanie notatki
- Kopiuj wszystko: umożliwia skopiowanie całej zawartości notatki
- Usuń: usuwa notatkę
- Eksportuj: eksportuje notatki do folderu Notatki znajdującego się w pamięci wewnętrznej SmartVision2

Modyfikacja notatki

W celu modyfikacji przy pomocy klawiszy nawigacyjnych należy wybrać notatkę z głównego ekranu aplikacji Notatki, po czym długo przytrzymać przycisk OK w celu otwarcia menu kontekstowego, z którego należy wybrać element Edytuj.

Od tego momentu można edytować notatkę, wpisując tekst. Notatkę można zachować po wybraniu przycisku Potwierdź, znajdującego się na dole ekranu.

Usuwanie notatki

By usunąć notatkę, należy wybrać ją w głównym oknie aplikacji Notatki przy pomocy klawiszy nawigacyjnych, po czym długo przytrzymać przycisk OK w celu otwarcia

menu kontekstowego, z którego należy wybrać element Usuń. Na zakończenie wystarczy wcisnąć przycisk Potwierdź, znajdujący się u dołu ekranu. Notatka zostanie usunięta.

OCR

Wstęp

Aplikacja OCR (Optical Character Recognition) umożliwia konwertowanie drukowanego tekstu na tekst cyfrowy i oznajmianie jego treści. Aplikacja korzysta z tylnej kamery SmartVision2, systemu oświetlenia z dwoma diodami LED i czujnika zbliżeniowego.

W celu zeskanowania drukowanego tekstu aplikacja OCR działa w następujący sposób:

- Krok 1: Wykonanie zdjęcia
- Krok 2: Konwertowanie obrazu do postaci dokumentu tekstowego w wybranym języku za pomocą mechanizmu OCR
- Krok 3: Oznajmianie zawartości dokumentu tekstowego przy pomocy mechanizmu zamiany tekstu na mowę

Dla udanego procesu rozpoznawania tekstu kluczowa jest dobra jakość obrazu. By uzyskać obraz o najwyższej jakości, SmartVision2 łączy specjalny system oświetleniowy z czujnikiem zbliżeniowym i ze specyficznymi algorytmami.

Opcje i parametry OCR

Przed rozpoczęciem rozpoznawania tekstu zalecane jest następujące ustawienie parametrów:

- Wybierz opcję asysty (oznajmianie odległości i nachylenia)
- Sprawdź wybrany język

Po wciśnięciu przycisku Menu dostępne są następujące opcje głównego menu OCR:

- Zdjęcie z Galerii: umożliwia wybranie zdjęcia z galerii zamiast wykonywania zdjęcia
- Opcje asysty: umożliwia włączanie i wyłączanie diod LED, ustawianie dźwięków pochylenia (dla pochylenia horyzontalnego) i odległości między aparatem a skanowaną stroną
- Język wykrywania OCR: ustawia język wykrywania OCR
- Pomoc: opcja ta umożliwia wyświetlenie z Podręcznika użytkownika rozdziału "OCR" (bieżącego rozdziału).

Podczas przechwytywania zdjęć dostępne są następujące skróty klawiszowe:

- Klawisz 2: włącza i wyłącza oświetlenie LED
- Klawisz 3: włącza i wyłącza dźwięk nachylenia (horyzontalnego)
- Klawisz 4: włącza i wyłącza oznajmianie odległości między kamerą a skanowaną stroną

Wykonanie zdjęcia

Aby poprawić wynik OCR, dokument należy umieścić przed sobą, pionowo na płaskiej, jasnej, dobrze oświetlonej powierzchni z jednolitym kolorem kontrastującym z dokumentem, który ma zostać rozpoznany.

Skierować kamerę SmartVision2 około dwudziestu centymetrów od celu. OCR będzie regularnie oznajmiał widoczne krawędzie i rogi arkusza.

Trzeba ustawić telefon w taki sposób, by widoczne były cztery rogi arkusza. Gdy tylko arkusz będzie ułożony prawidłowo, SmartVision2 poinformuje, że nie należy

przesuwać arkusza i po kilku sekundach zdjęcie zostanie wykonane automatycznie. Rozpoznanie optyczne rozpocznie się po wykonaniu zdjęcia. Przechwytywanie dokumentu można też wymusić bez wymogu wyświetlania czterech krawędzi, wciskając przycisk OK.

Odczytywanie wyniku OCR

Po zakończeniu procesu rozpoznawania wynik OCR jest automatycznie wyświetlany i oznajmiany. Jeśli rozpoznawanie nie powiedzie się, zalecany jest powrót do strony głównej aplikacji OCR i ponowne uruchomienie procesu.

Podczas oznajmiania rozpoznanego tekstu w celu poruszania się po nim można użyć następujących klawiszy :

- Klawisz 1: umożliwia odczytanie znaku na lewo od bieżącej pozycji
- Klawisz 2: umożliwia odczytanie znaku na prawo od bieżącej pozycji
- Klawisz 4: umożliwia odczytanie słowa na lewo od bieżącej pozycji
- Klawisz 5: umożliwia odczytanie słowa na prawo od bieżącej pozycji
- Klawisz 7: umożliwia powrót na początek rozpoznanego dokumentu
- Klawisz 8: umożliwia przejście na koniec rozpoznanego dokumentu

Warto wiedzieć: Po wybraniu przycisku Menu i elementu Zapisz dokument rozpoznany przez OCR zostanie zapisany jako notatka w aplikacji Notatki. Dostęp do notatek uzyskuje się z poziomu aplikacji Notatki.

Telefon

Aplikacja Telefon umożliwia nawiązywanie połączeń i przeglądanie historii połączeń.

Odbieranie połączenia

By odebrać telefon, w trakcie dzwonienia trzeba wcisnąć przycisk Odbierz połączenie. Przycisk Odbierz połączenie znajduje się po lewej stronie klawiatury. Stanowią go 3 tłoczone, zielone punkty, umieszczone pionowo.

Warto wiedzieć: W trybie bezczynności krótkie naciśnięcie przycisku Odbierz połączenie umożliwia szybkie uruchomienie aplikacji Telefon.

Kończenie połączenia

W celu zakończenia połączenia należy wcisnąć przycisk Zakończ połączenie. Przycisk Zakończ połączenie znajduje się z prawej strony klawiatury. Stanowią go 3 tłoczone, czerwone punkty, umieszczone poziomo.

Warto wiedzieć: Połączenie można też rozłączyć, krótko wciskając przycisk On / Off (patrz opcje ułatwień dostępu).

Odrzucanie połączenia

W celu odrzucenia połączenia należy wcisnąć przycisk Zakończ połączenie.

Warto wiedzieć: Można wysłać wiadomość automatyczną i rozłączyć się, wciskając klawisz kratki. Typ wiadomości można wówczas wybrać z listy. Lista automatycznych wiadomości może być edytowana za pomocą opcji Szybkie odpowiedzi w ogólnych ustawieniach aplikacji.

Wykonywanie połączenia

Na głównym ekranie aplikacji Telefon dostępne są poniższe opcje połączeń:

- **Wybierz numer:** opcja ta umożliwia wpisywanie numeru, potwierdzenie wpisu i wykonanie telefonu po wciśnięciu przycisku Odbierz połączenie.

- **Ulubione:** opcja ta umożliwia uzyskanie szybkiego dostępu do Ulubionych kontaktów. By ustawić kontakt jako ulubiony, należy wybrać go z listy kontaktów i długo wcisnąć klawisz OK. Po wybraniu elementu Ulubione zatwierdzić przyciskiem OK.
- **Częste:** opcja ta zapewnia szybki dostęp do kontaktów, z którymi użytkownik łączy się najczęściej

Warto wiedzieć: Lista często używanych kontaktów może zostać usunięta przy pomocy przycisku Menu.

- **Kontakty :** opcja ta umożliwia dostęp do książki telefonicznej.

Warto wiedzieć: Lista kontaktów zostanie przefiltrowana po wpisaniu na klawiaturze fizycznej nazwy poszukiwanego kontaktu.

- **Historia połączeń:** opcja ta umożliwia przeglądanie wszystkich wychodzących i odebranych połączeń. Połączenia te znajdują się na liście w porządku chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Po wybraniu kontaktu z listy i wciśnięciu klawisza OK uzyskuje się dostęp do dodatkowych opcji - numer telefonu, tworzenie kontaktu, dodawanie do kontaktu, wysłanie wiadomości, informacje o połączeniu).

Warto wiedzieć: Historia połączeń może być usunięta przy użyciu przycisku Menu.

- **Poczta głosowa:** opcja ta zapewnia szybki dostęp do usługi poczty głosowej. Uwaga: opcja ta, umożliwiająca odsłuchanie wiadomości poczty głosowej bez konieczności wybierania numeru, może nie być dostępna u wszystkich operatorów sieci. Standardowe wiadomości można jednak skonfigurować za pośrednictwem ustawień połączeń. W celu szybkiego dostępu poczta głosowa może być także skonfigurowana i przypisana do klawisza 1.
- **Wyszukaj:** opcja ta umożliwia wyszukiwanie kontaktów w książce telefonicznej

Po wciśnięciu przycisku Menu dostępne będą następujące opcje dodatkowe:

- **Ogólne:** opcja ta zapewnia dostęp do ogólnych ustawień aplikacji Telefon (opcje wyświetlania, dźwięk i wibracje, szybkie odpowiedzi, tryb TTY)
- **Połączenia:** opcja ta zapewnia dostęp do ustawień połączeń (konfiguracja poczty głosowej, autoryzowane numery, aparat słuchowy, przekazywanie dalej i blokowanie połączeń)
- **Szybkie wybieranie:** opcja ta umożliwia przypisywanie ulubionych numerów do klawiszy klawiatury fizycznej w celu szybkiego dostępu do nich. Po przypisaniu numeru można wcisnąć zaprogramowany klawisz, by rozpocząć połączenie bezpośrednio z ekranu głównego.
- **Pomoc:** opcja ta umożliwia przeglądanie rozdziału Telefon w Podręczniku użytkownika (tego rozdziału).

Opcje podczas połączenia

Podczas połączenia dostępne są następujące opcje:

- **Głośnik:** przełącza dźwięk komunikacji do głównego głośnika SmartVision2 (tryb głośnomówiący).

Warto wiedzieć: krótkie naciśnięcie przycisku poleceń głosowych przełącza SmartVision2 do trybu głośnomówiącego.

- **Cichy:** umożliwia wyciszenie SmartVision2, by rozmówca nie słyszał użytkownika.
- **Zawieś połączenie:** zawiesza bieżące połączenie.

- **Więcej opcji:** umożliwia rozpoczęcie innego połączenia lub nagranie rozmowy.

Zdjęcia Google

Aplikacja Zdjęcia Google jest standardową aplikacją Google umożliwiającą przeglądanie zdjęć w urządzeniu SmartVision2.

W celu uzyskania informacji na temat działania aplikacji Zdjęcia Google prosimy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika Google dostępnym po kliknięciu w poniższe łącze.

Łącze do Zdjęcia Google

Muzyka Play

Aplikacja Muzyka Play jest standardową aplikacją Google umożliwiającą pobieranie i słuchanie muzyki.

W celu uzyskania informacji na temat działania aplikacji Muzyka Play prosimy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika Google dostępnym po kliknięciu w poniższe łącze.

Łącze do Muzyka Play.

Sklep Play

Sklep Play jest standardową aplikacją Google, umożliwiającą pobieranie aplikacji i widżetów.

W celu uzyskania informacji na temat działania przeglądarki Chrome prosimy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika Google dostępnym po kliknięciu w poniższe łącze.

Łącze do Sklepu Play.

SOS

SmartVision2 został wyposażony w funkcję SOS, która pozwala na połączenia transmisyjne i / lub geolokalizacyjne komunikaty alarmowe do maksymalnie 10 predefiniowanych numerów telefonów.

Uwaga: KAPSYS nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z niedziałania funkcji SOS, jeśli jest to skutkiem problemów technicznych urządzenia lub braku dostępności sieci komórkowej.

Włączanie i wyłączanie funkcji SOS

Dzięki aplikacji SOS można zaprogramować automatyczną transmisję alertu, np. połączenia alarmowego, komunikatu alarmowego lub ich obu do wybranych osób. W przypadku zagrożenia i gdy funkcja SOS jest włączona wystarczy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk SOS umieszczony na tylnym panelu SmartVision2.

Alerty SOS można zatrzymać w jeden z następujących sposobów:

- Wciskając i przytrzymując przycisk SOS przez 3 sekundy
- Wciskając przycisk Zakończ połączenie
- Wciskając przycisk Wstecz.

Warto wiedzieć: Dopóki trwa proces SOS, wyświetlany jest ekran ostrzegawczy.

Uwaga: funkcja SOS jest domyślnie wyłączona. Funkcja ta musi być włączona i skonfigurowana przed każdym użyciem. Gdy nie zostanie skonfigurowana poprawnie na pasku powiadomień pojawi się odpowiednia informacja.

Ustawianie parametrów funkcji SOS

Przed zastosowaniem funkcji SOS należy zdefiniować następujące parametry:

- Przycisk SOS: umieszczony na tylnym panelu SmartVision2 przycisk SOS włącza i wyłącza funkcję SOS
- Odtwarzaj alarm: aktywuje głośny dźwięk alertu
- Migające diody LED: włącza i wyłącza sygnał SOS emitowany przez diody LED
- Lista telefonów: umożliwia zdefiniowanie listy numerów alarmowych. Po uruchomieniu SOS numery te będą wywoływane sekwencyjnie lub będą używane do wysyłania wstępnie sformatowanego SMS-a
- Połączenie telefoniczne: aktywuje połączenia telefoniczne z numerami znajdującymi się na zdefiniowanej liście. W przypadku zagrożenia połączenia alarmowe będą inicjowane sekwencyjnie jedno po drugim, aż do odebrania połączenia
- Czas na odpowiedź: określa czas oczekiwania na połączenie z kolejnym numerem na liście (domyślny czas to 30 sekund)
- Wykrywanie poczty głosowej: umożliwia uniknięcie blokowania przez pocztę głosową. Rozmówca będzie musiał nacisnąć klawisz na swoim telefonie, by odebrać połączenie.
- Wyślij SMS: aktywuje wysyłanie SMS-ów na numery zdefiniowane na liście
- Wyślij współrzędne: w momencie uruchomienia SOS aktywuje wysyłanie SMS-a ze współrzędnymi GPS, o ile są dostępne
- Tekst wiadomości: umożliwia edycję wstępnie zdefiniowanej wiadomości awaryjnej, która zostanie włączona do wiadomości SMS
- Pomoc: umożliwia wyświetlenie z Podręcznika użytkownika rozdziału "SOS" (bieżącego rozdziału).

Ustawienia

Aplikacja Ustawienia umożliwia aktywowanie lub dezaktywowanie niektórych funkcji lub modyfikację istniejących ustawień. SmartVision2 ma wiele predefiniowanych ustawień, które można edytować, m.in. język, wyświetlacz, itp.

Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne SmartVision2 są uporządkowane według kategorii w następujący sposób:

Kategoria sieć bezprzewodowa i sieci

- Wi-Fi: umożliwia włączanie Wi-Fi i zarządzanie łącznością w celu uzyskania dostępu do Internetu.
- Pobieranie turbo: umożliwia szybsze pobieranie dużych plików przy jednoczesnym korzystaniu z Wi-Fi oraz sieci komórkowej 3G / 4G.
- Bluetooth: umożliwia włączanie bluetooth oraz zarządzanie połączeniami z akcesoriami i peryferiami bluetooth w celu wymiany danych lub plików multimedialnych.

- Użycie danych: umożliwia zarządzanie wykorzystaniem planu taryfowego i dostosowywaniem limitu wykorzystania danych.
- Więcej: pozwala na uzyskanie dostępu do następujących, dodatkowych parametrów:
 - Tryb samolotowy: umożliwia wyłączenie wszystkich źródeł transmisji radiowej Wi-Fi, bluetooth, sieci komórkowej, itp.
 - NFC: Włącza, wyłącza i ustawia funkcję NFC. Funkcja NFC umożliwia dokonywanie płatności, zakupu biletów transportu miejskiego lub biletów na imprezy kulturalne. Funkcja działa po pobraniu aplikacji korespondujących z wymienionymi usługami.
 - Tethering i przenośny hotspot: umożliwia korzystanie z telefonu jako modemu i udostępnianie połączenia internetowego innym urządzeniom.
 - VPN: umożliwia konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.
 - Sieci komórkowe: umożliwia konfigurację ustawień sieci komórkowej (dane w roamingu, nazwy punktów dostępu, typ sieci, operatorzy sieci, itp.).

Kategoria urządzenie

- Ekran główny: umożliwia modyfikowanie wyglądu Ekranu głównego
- Wyświetlacz: umożliwia konfigurowanie wyglądu ekranu - poziomu jasności, tapety, trybu czuwania, rozmiaru czcionki, itp.
- Dźwięk i powiadomienia: umożliwia konfigurowanie dźwięków urządzenia - dzwonka, powiadomienia o wiadomości, głośności, itp.
- Aplikacje: umożliwia zarządzanie aplikacjami zainstalowanymi na SmartVision2.
- Pamięć i USB: umożliwia zarządzanie przestrzenią różnych rodzajów pamięci SmartVision2.
- Bateria: umożliwia monitorowanie stopnia rozładowania baterii.
- Pamięć: umożliwia zarządzanie stopniem użycia pamięci SmartVision2.

Kategoria Osobiste

- Lokalizacja: umożliwia włączanie i wyłączanie usługi lokalizacyjnej Google. usługa ta umożliwia aplikacjom i witrynom stron trzecich zbieranie i wykorzystywanie informacji związanych z lokalizacją urządzenia SmartVision2, w celu świadczenia różnych usług związanych z lokalizacją.
- Bezpieczeństwo: umożliwia zarządzanie parametrami bezpieczeństwa (kod PIN, ekran blokady, hasła, itp.).
- Konta: umożliwia zarządzanie kontami email oraz ich synchronizacją.
- Google: umożliwia zarządzanie ustawieniami aplikacji i usług Google.
- Język i wprowadzanie: umożliwia skonfigurowanie języka wyświetlania i wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury.
- Backup i reset: umożliwia usuwanie danych osobistych i przywracanie ustawień domyślnych.

Kategoria system

- Data i czas: umożliwia konfigurowanie daty i czasu (strefa czasowa, format czasu, itp.).
- Zaplanowane włączanie i wyłączanie: umożliwia zaprogramowanie automatycznego wyłączania i włączania urządzenia.

- Ułatwienia dostępu: umożliwia konfigurowanie parametrów ułatwień dostępu SmartVision2. Ułatwienia dostępu zostały opisane w rozdziale Ułatwienia dostępu .
- Drukowanie: umożliwia konfigurowanie ustawień wtyczek drukarki zainstalowanych na SmartVision2.
- O telefonie: umożliwia przeglądanie statusu telefonu i instalowanie aktualizacji.

Połączenie z Wi-Fi

By połączyć się z Wi-Fi należy wybrać Wi-Fi z listy ustawień, po czym zmienić status Wi-Fi na Włączony, by obejrzeć listę dostępnych sieci.

Z listy wybrać sieć, z którą chcemy się połączyć i w celu połączenia wcisnąć przycisk OK.

By połączyć się z bezpieczną siecią Wi-Fi, należy wprowadzić hasło. Po zaznaczeniu zlokalizowanej pod polem wprowadzania opcji Pokaż hasło można wyświetlić hasło Wi-Fi do oznajmienia.

Na koniec należy wybrać opcję Połącz i zakończyć procedurę. Po poprawnym przeprowadzeniu procedury pod nazwą sieci wyświetlony zostanie status "Połączony".

Warto wiedzieć: hasło i typ klucza bezpieczeństwa (WEP / WPA2) są dostarczane przez usługodawcę lub znajdują się w instrukcji obsługi routera. Należy zapoznać się z tymi informacjami, by skonfigurować połączenie. Podczas wprowadzania hasła należy respektować wielkość liter.

Warto wiedzieć: Dodatkowe parametry połączenia są dostępne z poziomu przycisku Menu.

Połączenie z urządzeniem bluetooth

By włączyć bluetooth, należy wybrać element Bluetooth z listy ustawień, po czym zmienić status bluetooth na Włączony, by wyświetlić listę dostępnych, znajdujących się w pobliżu urządzeń.

Z listy tej należy wybrać urządzenie bluetooth, które ma być sparowane ze SmartVision2, po czym wcisnąć przycisk OK w celu połączenia się z nim.

W celu zakończenia powiązania, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli pojawi się monit o wprowadzenie kodu PIN, trzeba wypróbować 0000 lub 1234 (są to najczęściej używane kody) lub zapoznać się z dokumentacją urządzenia. Jeśli parowanie się powiedzie, oba urządzenia połączą się ze sobą.

Warto wiedzieć: By przedłużyć czas pracy baterii warto wyłączyć połączenie bluetooth, jeśli nie jest potrzebne.

Warto wiedzieć: Dodatkowe parametry połączenia są dostępne z poziomu przycisku Menu.

Aktualizacja urządzenia

Pobieranie i instalowanie aktualizacji SmartVision2 wymaga połączenia z Internetem. By zaktualizować urządzenie, należy wybrać Ustawienia, O telefonie, Aktualizacje systemu, po czym wybrać element Pobierz i zainstaluj z końca listy i wcisnąć przycisk OK, by rozpocząć pobieranie.

Pobieranie aktualizacji może zabrać nieco czasu w zależności od jakości połączenia. Postęp pobierania można kontrolować w oknie powiadomień. Po zakończeniu pobierania na ekranie aktualizacji systemu należy wybrać Zainstaluj. Proces ten może potrwać kilka minut.

Zmiana głosu syntezy

SmartVision2 wyposażono domyślnie w standardowej jakości głosy męski i żeński. Za pośrednictwem połączenia internetowego można jednakże pobrać darmowe, dodatkowe głosy Premium. Zmiana głosu syntezy mowy jest możliwa po wybraniu z listy ustawień elementu Ułatwienia dostępu, po czym wybraniu Zamiana tekstu na mowę.

Domyślnie dostępne są dwa rodzaje syntezy mowy:

- Głosy Kapsys: umożliwia wybranie standardowej syntezy mowy lub pobranie za pośrednictwem Internetu najwyższej jakości, bezpłatnej syntezy mowy.
- Wielojęzyczność: umożliwia skojarzenie maksymalnie trzech języków przy pomocy skrótów klawiszowych oraz natychmiastową zmianę języka systemu podczas pracy.

Ustawienia mechanizmu głosów Kapsys

Należy wybrać Uruchom ustawienia mechanizmu dla głosu Kapsys, by uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Język: umożliwia wybranie domyślnego języka mowy syntetycznej.
- Ustawienia głosów Kapsys: umożliwia wybranie rodzaju i jakości syntezy mowy - głosu żeńskiego lub męskiego w jakości normalnej lub premium.
- Zainstaluj dane głosu: umożliwia pobranie Głosów Premium. W celu pobraniażądanego głosu trzeba wybrać ten głos z listy i wcisnąć przycisk OK. Do końca instalacji postępować zgodnie z procedurą. Zainstalowane głosy staną się wówczas dostępne na liście Ustawienia głosów Kapsys.

Ustawienia mechanizmu wielojęzyczności

Z menu Wielojęzyczność należy wybrać Uruchom ustawienia mechanizmu, by uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Język: umożliwia wybranie domyślnego języka mowy syntetycznej.
- Ustawienia wielojęzyczności: opcja ta umożliwia domyślnie zdefiniowanie trzech głosów. Można ustawić skrót klawiszowy, by szybko przełączać języki (patrz punkt Skróty klawiszowe w rozdziale Ułatwienia dostępu).

Rejestrator głosu

Aplikacja Rejestrator głosu umożliwia nagrywanie głosowych notatek i późniejsze ich odtwarzanie

Nagrywanie notatki głosowej

By rozpocząć nagrywanie, na głównym ekranie aplikacji trzeba wcisnąć przycisk Nagrywaj.

Przycisk Zatrzymaj służy do zatrzymywania nagrywania, zaś przycisk Nagrywaj do wznowiania nagrywania.

Przycisk Stop kończy nagrywanie.

Po zakończeniu nagrywania do wyboru są następujące trzy opcje:

- Odtwarzaj: umożliwia odtworzenie nagranej notatki głosowej
- Usuń: umożliwia odrzucenie nagranej notatki głosowej

- Zapisz: umożliwia zapisanie nagranej notatki głosowej

Odtwarzanie notatki głosowej

Z głównego ekranu aplikacji należy wybrać element Lista, po wybraniu którego wyświetlana jest lista wszystkich nagranych notatek głosowych.

Z listy należy wybrać notatkę głosową, która ma być odtworzona i wcisnąć przycisk OK.

Podczas odtwarzania można wykonywać następujące czynności:

- Zatrzymaj / Odtwarzaj: umożliwia zatrzymywanie lub odtwarzanie notatki głosowej
- Stop: kończy odtwarzanie notatki głosowej

Po zakończeniu odtwarzania można wybrać jedną z następujących opcji:

- Odtwarzaj: umożliwia ponowne odtworzenie notatki głosowej
- Lista: wyświetla wszystkie nagrane notatki głosowe
- Usuń: umożliwia usunięcie aktualnej notatki głosowej.

Zmiana nazwy notatki głosowej

By zmienić nazwę notatki głosowej, na ekranie głównym aplikacji należy wybrać element Lista. Pojawi się wówczas lista wszystkich notatek głosowych, z której należy wybrać tę notatkę, która ma być edytowana, po czym długo przytrzymać przycisk OK.

Wybrać Zmień nazwę nagrania i usunąć zawartość pola edycyjnego, po czym przy pomocy klawiszy nawigacyjnych wprowadzić nową nazwę notatki głosowej i wcisnąć przycisk OK.

Usuwanie notatki głosowej

By usunąć notatkę głosową, na ekranie głównym aplikacji należy wybrać element Lista. Pojawi się wówczas lista wszystkich notatek głosowych, z której należy wybrać tę notatkę, która ma być usunięta z listy i długo przytrzymać przycisk OK.

Na zakończenie trzeba wybrać element Usuń nagranie i zatwierdzić operację, wybierając przycisk OK przy pomocy klawiszy nawigacyjnych.

Web Radio

Aplikacja ta umożliwia słuchanie preferowanych stacji radiowych w połączeniu z Internetem.

Słuchanie stacji radiowej

By słuchać radia internetowego, należy wpisać jego nazwę w polu wprowadzania i wcisnąć przycisk OK. Wyświetlą się wówczas wyniki wyszukiwania.

Wyniki wyszukiwania można przeglądać przy pomocy klawiszy nawigacyjnych, po czym wybrać z listy radio, którego zamierzamy słuchać.

Oto lista innych opcji Web Radio:

- Ostatnio odtwarzane: zapewnia szybki dostęp do ostatnio słuchanych stacji
- Ulubione: zapewnia szybki dostęp do stacji zachowanych jako ulubione
- Wszystkie: umożliwia przeglądanie wszystkich, dostępnych stacji radiowych w aplikacji Web Radio - według kategorii, według kraju, według podcastów, itp.

Warto wiedzieć: Podczas odtwarzania stacji można wybrać pozycję Dodaj do ulubionych u dołu ekranu i zapisać słuchaną stację radiową w ulubionych.

FAQ

Informacje ogólne

Czy aktualizacja oprogramowania jest odpłatna?

Nie, wszystkie aktualizacje SmartVision2 są bezpłatne.

Skąd wiadomo kiedy aktualizacja jest dostępna?

SmartVision2 regularnie sprawdza dostępność aktualizacji. Kiedy aktualizacja będzie dostępna zostanie wysłane automatyczne powiadomienie i pojawi się ono w oknie powiadomień.

W każdej chwili można sprawdzić dostępność aktualizacji z poziomu menu

Ustawienia, Informacje o telefonie, Aktualizacje systemu.

Co zrobić jeśli nie można pobrać aktualizacji?

By SmartVision2 mógł pobrać aktualizację, telefon musi być połączony z internetem.

Dla zoptymalizowania czasu pobierania zalecane jest skorzystanie z łączności Wi-Fi.

Jeśli podczas pobierania wystąpi błąd, należy ponownie uruchomić aktualizację z poziomu Ustawienia, Informacje o telefonie, Aktualizacje systemu.

Stan postępu pobierania można wyświetlić przy pomocy powiadomień o aktualizacji w oknie powiadomień.

Po zakończeniu pobierania, na ekranie aktualizacji systemu należy wybrać

Zainstaluj.

Telefon zbyt szybko przełącza się do trybu gotowości, czy można zmienić czas opóźnienia przed przejściem do tego trybu?

Tak, do wyboru jest 7 różnych czasów opóźnienia. SmartVision2 uruchamia się po raz pierwszy z domyślnym czasem opóźnienia "1 minuty". Aby zmienić czas opóźnienia, trzeba przejść do menu Ustawienia, Ekran, Uśpienie i ustalić wymagany czas opóźnienia pomiędzy 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min lub 30 min.

Jak uzyskać informacje o stanie baterii, sieci bezprzewodowej, dacie i czasie oraz odebranych wiadomościach?

Aby uzyskać statusowe informacje telefonu, należy wcisnąć jednocześnie klawisze funta i 1.

Informacje te zostaną też automatycznie oznajmione po odblokowaniu SmartVision2.

Po każdorazowym wyjściu z trybu uśpienia domyślnie oznajmiany jest czas i poziom naładowania baterii.

By dodać więcej oznajmianych informacji, trzeba wcisnąć jednocześnie klawisze krzyżyk i zero, co spowoduje otwarcie usługi ułatwień dostępu Kapsys, po czym wybrać z listy pozycję Budzenie mowy.

Z poniższej listy można wybrać informacje, które będą oznajmiane po odblokowaniu SmartVision2. Do wyboru są: Bieżący czas, Aktualna data, Poziom naładowania baterii, Stan sieci, Nieodebrane połączenia, Nowe wiadomości, Nowa wiadomość email, Nowa aktualizacja oprogramowania.

Dlaczego nie można wpisywać tekstu za pomocą klawiatury?

Aplikacje ze Sklepu Google mogą niekiedy być niekompatybilne z fizyczną klawiaturą. W takim przypadku preferowane jest korzystanie z klawiatury wirtualnej.

By wyświetlić klawiaturę wirtualną po wybraniu obszaru wprowadzania, należy nacisnąć przycisk OK. Klawiatura pojawi się wówczas w dolnej części ekranu.

Trzymając palec na ekranie należy przeglądać litery wirtualnej klawiatury, zaś uniesienie palca na żądanym znaku spowoduje jego wpisanie.

Czy można całkowicie wyłączyć ekran dotykowy?

Tak, w tym celu należy jednocześnie nacisnąć klawisze krzyżyk i zero, by otworzyć Ustawienia usługi ułatwień dostępu Kapsys, a następnie zaznaczyć Wyłącz ekran dotykowy.

Jak zwiększyć rozmiar czcionki informacji wyświetlanych na ekranie?

Rozmiar czcionki można zwiększyć przy pomocy Ustawienia, Ułatwienia dostępu, Rozmiar czcionki.

Można też w tym celu użyć gestów powiększania, które są domyślnie aktywowane w SmartVision2. Pozwalają one na powiększanie obrazu przez szybkie, trzykrotne naciśnięcie ekranu. Po powiększeniu można przeglądać stronę, przeciągając dwoma palcami po ekranie lub regulując poziom powiększenia, ściskając ekran dwoma palcami lub rozsuwając je.

Na koniec, naciskając jednocześnie klawisze Funt i 6, można także skorzystać z funkcji MagniText. Funkcja ta pozwala wyświetlić w jednym wierszu na ekranie ostatnią odsłoniętą informację. Wymagane jest przełączenie SmartVision2 do trybu poziomego, by było możliwe wyświetlanie tych informacji na ekranie.

W jaki sposób zoptymalizować autonomię SmartVision2?

W przypadku gdy Wi-Fi, bluetooth i lokalizacja GPS nie są używane, można je wyłączyć (skrót: jednoczesne wciśnięcie klawiszy Funt, i 3).

Można także zmniejszyć jasność ekranu lub użyć funkcji Czarny ekran, aby wyłączyć zasilanie ekranu dotykowego. By to zrobić, należy jednocześnie wcisnąć klawisze Funt i 0, co otworzy ustawienia dostępności, po czym zaznaczyć na liście Czarny ekran.

Czy można dokonać aktualizacji, by uzyskać aplikacje SmartVision2 Premium?

Tak, domyślnie aplikacje OCR, Kapten i Book Reader, które są aplikacjami SmartVision2 Premium, są dostępne na urządzeniu SmartVision2 przez 15-dniowy okres próbny. Aktywacja wersji próbnej rozpoczyna się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji (do uruchomienia aplikacji w okresie próbnym wymagane jest połączenie z Internetem). Po wygaśnięciu okresu próbnego aplikacja przestanie działać. W celu zakupu stałej wersji jednej lub kilku potrzebnych aplikacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Synteza mowy i rozpoznawanie mowy

W jaki sposób zmienić syntezę mowy?

Należy w tym celu nacisnąć i przytrzymać klawisz Menu, by otworzyć globalne menu kontekstowe i wybrać Ustawienia zamiany tekstu na mowę. Wybrać przycisk Uruchom ustawienia silnika głosów Kapsys. Następnie wybrać Ustawienia dla głosów Kapsys, po czym Wybierz głos. Wyświetlona zostanie wówczas lista głosów zainstalowanych na urządzeniu SmartVision2. Należy wybrać z niej głos, który będzie używany i potwierdzić, wybierając przycisk OK.

W jaki sposób pobrać nową syntezę mowy?

SmartVision2 wyposażono domyślnie w głosy męski i żeński o standardowej jakości. Za pośrednictwem połączenia internetowego można jednakże pobrać darmowe, dodatkowe głosy Premium..

By pobrać głosy Premium, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Menu w celu otwarcia globalnego menu kontekstowego i wybrać Ustawienia zamiany tekstu na mowę. Wybrać przycisk Uruchom ustawienia silnika głosów Kapsys, następnie Zainstaluj dane głosowe, wybrać z listy głos, który ma być zainstalowany i potwierdzić pobieranie, wciskając OK.

Po zakończeniu pobierania należy zaznaczyć Zainstaluj na dole listy, a po zakończeniu instalacji z końca listy wybrać OK. Po zakończeniu pobierania należy zaznaczyć Zainstaluj na dole listy, a po zakończeniu instalacji z końca listy wybrać OK.

Nowy głos stanie się dostępny w Ustawieniach głosu Kapsys, Głos Kapsys..

Czy można dostosowywać prędkość głosu?

Tak, dostępnych jest kilka poziomów prędkości w zależności od preferencji użytkownika. Po pierwszym uruchomieniu SmartVision2 domyślnie aktywowany jest poziom Normalny.

Należy jednocześnie wciskać klawisze funt i 4 lub funt i 5, aby odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć szybkość mowy.

Szybkość mowy można też zmienić przez długie naciśnięcie przycisku Menu, aby otworzyć Globalne menu kontekstowe, po czym otworzyć Ustawienia zamiany tekstu na mowę, a następnie Szybkość mowy i wybrać preferowaną szybkość spośród następujących opcji: bardzo wolno, wolno, normalnie, szybko, szybciej, bardzo szybko, szybko lub bardzo szybko.

W jaki sposób dostosować głośność telefonu?

SmartVision2 rozróżnia trzy rodzaje głośności, dla których można oddzielnie zdefiniować poziom dźwięku. Są nimi Dzwonek i powiadomienia, Multimedia i Alarmy.

- Dzwonek i powiadomienia:

Do zmiany głośności Dzwonka i powiadomień służą domyślnie klawisze Głośniej i Ciszej znajdujące się po prawej stronie telefonu. Głośność dzwonka i powiadomień można także zmieniać z poziomu menu Ustawienia, Dźwięk i powiadomienie, przy pomocy przycisku Ustawienia urządzenia w profilu Ogólnym, po czym Głośność dzwonka.

- Multimedia:

Są nimi dźwięk syntezy mowy, pliki MP3 lub filmy. Do zmiany profilu multimedialnego służą klawisze głośności "plus" i "minus", których należy użyć podczas działania syntezy mowy lub podczas odtwarzania pliku MP3.

- By zmienić dźwięk alarmu, należy:

Wybrać Ustawienia, Dźwięk i powiadomienie, Ustawienia urządzenia z profilu Ogólnego, a następnie Głośność alarmu.

Czy polecenia głosowe działają bez połączenia z Internetem?

Nie, do korzystania z poleceń głosowych wymagane jest połączenie internetowe.

W jakich aplikacjach można korzystać z rozpoznawania mowy?

Z rozpoznawania mowy można korzystać w polach wprowadzania. Można wówczas używać przycisku do poleceń głosowych, aby dyktować tekst lub zaszyfrowaną treść.

Funkcjonalność tę można stosować w następujących, przykładowych aplikacjach:

- W Telefonie w celu dyktowania numeru telefonicznego,
- W Wiadomościach w celu dyktowania treści wiadomości SMS,
- w Poczcie email w celu dyktowania treści wiadomości email,

Przycisku poleceń głosowych można też używać do przeszukiwania internetu lub uruchamiania niektórych funkcji.

Pełna lista czynności, które można wykonywać za pomocą rozpoznawania mowy, jest dostępna w dziale pomocy Google lub po zastosowaniu słowa kluczowego OK Google.

Łączność

W jaki sposób można przysyłać pliki (muzykę, tekst ...) z komputera do SmartVision2?

Należy w tym celu podłączyć SmartVision2 do komputera za pomocą kabla USB. Wyświetlone zostanie wówczas okno ustawień połączeń USB. Trzeba wybrać w nim "Transfer Files". SmartVision2 zostanie rozpoznany jako zewnętrzna stacja dysków, co umożliwi przesyłanie plików..

Jeśli komputer działa pod kontrolą systemu Windows 10, przed rozpoznaniem urządzenia SmartVision2 jako dysku zewnętrznego konieczne będzie zainstalowanie sterownika . Należy w tym celu otworzyć Menedżer plików systemu Windows, gdy SmartVision2 jest podłączony do komputera. Z listy Nieznane urządzenie wybrać Aktualizuj sterownik. W kolejnym oknie wybrać Wyszukaj sterownik na moim komputerze, a następnie zaznaczyć Wybierz z listy sterowników urządzeń na moim komputerze. Wybrać z listy Android Phone, po czym Urządzenie USB MTP . Procedurę instalacji sterownika zatwierdzamy wybierając opcję Dalej.

W przypadku komputerów Mac trzeba pobrać oprogramowanie kompatybilności urządzeń Android, takie jak Android File Transfer.

Czy jest możliwe zwiększenie pamięci SmartVision2?

Tak, pamięć urządzenia SmartVision2 można rozszerzyć, wkładając kartę Micro SD o pojemności do 64 GB. Lokalizacja karty Micro SD znajduje się tuż nad kartą SIM.

Czy do SmartVision2 można podłączyć zestaw słuchawkowy Bluetooth ?

Tak, z telefonem z SmartVision2 można sparować zestaw słuchawkowy Bluetooth , by wykonywać i odbierać połączenia. Należy w tym celu aktywować połączenie bluetooth: w Ustawieniach aktywować Bluetooth i otworzyć Bluetooth, by wykryć wszystkie urządzenia w pobliżu. Należy wybrać model zestawu słuchawkowego, który ma być podłączony i wcisnąć OK w celu jego sparowania, po czym wprowadzić kod PIN (domyślnie kod PIN to najczęściej 0000 lub 1234).

Ostrzeżenie: jeśli użytkownik zamierza słuchać muzyki, słuchać radia lub korzystać z syntezy mowy SmartVision2, konieczne jest zastosowanie zestawu słuchawkowego Bluetooth typu "A2DP" (ang. advanced audio distribution profile _ zaawansowany profil dystrybucji dźwięku).

Czy do SmartVision2 można podłączyć monitor brajlowski?

Tak, do SmartVision2 można podłączyć monitor brajlowski. Należy w tym celu pobrać aplikację BrailleBack ze Sklepu Play. Aplikacja ta umożliwia podłączenie monitora brajlowskiego do SmartVision2 za pośrednictwem technologii bluetooth. Podczas korzystania z BrailleBack zawartość ekranu pojawia się na wyświetlaczu brajlowskim. Można wówczas sterować i nawigować po urządzeniu za pomocą klawiszy monitora brajlowskiego. Możliwe jest też wprowadzanie tekstu przy pomocy klawiatury brajlowskiej.

By uzyskać więcej informacji na temat instalowania BrailleBack i kojarzenia monitora brajlowskiego, należy się zapoznać z poniższym odnośnikiem: [Google BrailleBack](#).

Telefon i SMS

Jak umieścić kontakt w Ulubionych??

Aby utworzyć kontakt jako Ulubione, z poziomu zakładki kontaktu aplikacji Kontakty należy nacisnąć przycisk Menu, a następnie Dodaj do ulubionych.

W jaki sposób zaimportować kontakty?

Domyślnie kontakty na karcie SIM są wyświetlane automatycznie. Można jednak importować inne kontakty z pamięci wewnętrznej telefonu lub z karty SD. Aby to

zrobić, trzeba uruchomić aplikację Kontakty, a następnie nacisnąć klawisz Menu, wybierając na koniec Import / Export. Należy następnie wybrać z listy Importuj z pliku .vcf i postępować zgodnie z procedurą importowania.

Jak aktywować głośnik podczas rozmowy telefonicznej?

By włączyć lub wyłączyć głośnik podczas trwania rozmowy, należy krótko wcisnąć przycisk poleceń głosowych po prawej stronie urządzenia SmartVision2.

Czy możliwe jest prowadzenie rozmów wideo?

Tak, SmartVision2 wyposażono w przednią kamerę, można więc pobrać aplikacje typu Skype i wykonywać połączenia wideo.

Jak wybrać domyślny dzwonek?

SmartVision2 oferuje niemal sto dzwoneków.

Aby zmienić dzwonek, należy wybrać Ustawienia, Dźwięki i powiadomienie, Ustawienia urządzenia w profilu Ogólnym, a następnie Dzwonek telefonu. wybrać z listy dzwonek, który ma być używany i potwierdzić wybór, przyciskiem OK na końcu listy.

Czy można przypisać dzwonek do jednego z kontaktów?

W celu powiązania określonego dzwonka z kontaktem, trzeba otworzyć kartę kontaktu, nacisnąć klawisz Menu i wybrać Edytuj. Ponownie nacisnąć przycisk Menu i wybrać Ustaw dzwonek.

Jak przełączyć telefon do trybu cichego?

Należy w tym celu wybrać Ustawienia, a następnie Dźwięki i powiadomienia, po czym wybrać Cichy i zatwierdzić przyciskiem OK.

Aby powrócić do trybu dzwonka, należy wybrać Ustawienia ogólne i zatwierdzić przyciskiem OK.

Opcje te są też dostępne w szybkich ustawieniach SmartVision2, po wciśnięciu klawiszy Funt + 3.

Odtwarzacz MP3 i radio FM

Co się stanie, gdy użytkownik otrzyma połączenie podczas słuchania pliku MP3?

Po otrzymaniu połączenia odtwarzacz MP3 zostaje wstrzymany, a telefon dzwoni w standardowy sposób. Po zakończeniu połączenia utwór będzie wznowiony w miejscu pauzy.

Jak korzystać z funkcji radia FM?

Radio FM działa tylko po podłączeniu słuchawek, ponieważ działają one także jako antena. Można wówczas korzystać z przycisków do skanowania częstotliwości radiowych.

NFC

Czym jest technologia NFC?

Technologia NFC (ang. Near Field Communication) to prosta i intuicyjna technologia, która pozwala korzystać z telefonu komórkowego w innowacyjnych celach.

Znacznik NFC może być powiązany z informacjami, takimi jak strona internetowa, tekst, konfiguracja lub wszelkiego rodzaju informacje. Można zatem używać telefonu do odczytywania informacji zapisanych w elektronicznym znaczniku NFC.

W jaki sposób działa aplikacja NFC?

Po uruchomieniu aplikacji NFC można wybrać informacje, które mają być nagrane na znaczniku NFC (uruchom wywołanie, aplikację, stronę internetową, odczytaj tekst, notatkę głosową itd.).

Następnie należy przybliżyć tylną część telefonu do znacznika, by przesłać informacje. Po zakończeniu nagrywania należy umieścić znacznik w dogodnym dla siebie miejscu (teczka, pojemnik na lekarstwa, szuflada w biurku, itp.)

Po umieszczeniu tylnej części telefonu na znaczniku NFC SmartVision2 rozpocznie związaną z nim czynność.

Czy znaczniki NFC można ponownie wykorzystać?

Tak, ten sam znacznik NFC może być wielokrotnie używany. Wprowadzenie nowych danych do znacznika zastępuje uprzednio wprowadzone dane.

Jakiego rodzaju znaczników NFC należy używać?

SmartVision2 jest kompatybilny z dowolnym typem znaczników NFC. Istnieją różne rozmiary znaczników odpowiadające różnym rozmiarom pamięci. SmartVision2 posiada 5 znaczników typu NTAG 216 o pojemności 888 bajtów.

Odpowiada to około 400 znakom wiadomości tekstowej.

Kapten GPS

W jaki sposób działa Kapten GPS?

Aplikacja Kapten to system nawigacji zaprojektowany specjalnie dla osób z dysfunkcjami wzroku i wykorzystujący geopozycjonowanie przez satelity (system GPS).

Podczas pierwszego uruchomienia do pobrania map wymagane jest połączenie z Internetem.

Dane mapy Kapten są przechowywane w pamięci urządzenia SmartVision2, dzięki czemu z tej aplikacji można korzystać bez połączenia z Internetem.

Czy konieczne jest podanie adresu docelowego dla wskazówek głosowych?

Nie, można korzystać z trybu Free Navigation, który pozwala uzyskiwać opis otoczenia w czasie rzeczywistym. Po aktywowaniu tej funkcji aplikacja Kapten oznajmi ulicę, na której znajduje się użytkownik i opis następnej przecznicy. Po dotarciu do skrzyżowania aplikacja Kapten opisz je, podając nazwy ulic tworzących skrzyżowanie, zaś po minięciu skrzyżowania oznajmiona zostanie następna ulica, do której zmierza użytkownik.

Czy podczas podróży mogą być oznajmiane interesujące miejsca wokół lokalizacji użytkownika?

Tak, funkcja Free Navigation umożliwia oznajmianie miejsc istotnych dla użytkownika. W czasie rzeczywistym opisywane będzie jego otoczenie, oznajmiane będą skrzyżowania, podawana aktualna pozycja, a także punkty szczególne, (tzw. points of interest) takie jak sklepy, miejsca publiczne, metro, parkingi ... (cele specjalne - ang. points of interest - oznajmiane w bezpłatnej nawigacji są konfigurowalne z poziomu menu aplikacji Kapten).

Czy można korzystać z GPS Kapten w trybie samochodowym?

Tak, Kapten GPS posiada tryb nawigacji samochodowej, który oferuje zoptymalizowaną trasę podróży samochodem.

Czy znajdując się w pomieszczeniu można wirtualnie przeglądać trasę, by móc przewidzieć, jaką trasę wybrać na zewnątrz?

Tak, dzięki Trybowi odczytywania kart można przeglądać wirtualnie i przygotowywać trasy w domu, z punktu A do punktu B, bez połączenia GPS.

Czym są znaczniki K?

Znacznik K (ang. K-Tag) jest utworzonym przez użytkownika punktem odniesienia (ang. point of interest), np. ulubionym adresem.

Znacznik K zawiera następujące elementy: położenie geograficzne lub adres, kategorię i nazwę.

Czym jest tryb podstawowe prowadzenie (cardinal guidance)?

Tryb podstawowego prowadzenie pozwala na uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o odległości i kierunku do punktu docelowego. Odległość jest obliczana w linii prostej, tak więc nie jest uwzględniona sieć dróg. Ten tryb nawigacji przypomina nawigację z kompasem.

OCR

Czym jest OCR?

Funkcja OCR (ang. optical character recognition) umożliwia optyczne rozpoznawanie znaków z dokumentu tekstowego, a następnie oznajmianie jego treści.

Jak to działa?

Działanie OCR jest proste - SmartVision2 robi zdjęcie dokumentu, następnie konwertuje zdjęcie na tekst, po czym syntezyzator mowy odczytuje treść zeskanowanego dokumentu.

Jak poprawić jakość skanowania OCR?

Aplikacja OCR została wyposażona w system rozpoznawania dokumentów, który umożliwia poprawną konwersję dokumentu A4 z czcionkami większymi lub równymi 12. Jakość wyniku OCR zależy głównie od jakości przechwytywania dokumentu. Aby poprawić jakość przechwytywania dokumentu, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- Należy się upewnić, że istnieje dobry kontrast między skanowanym dokumentem a mediami. Idealny byłby np. biały dokument na ciemnym stole lub na kolorowym obrusie.
- SmartVision2 wykryje krawędzie dokumentu, by zrobić zdjęcie. Gdy wszystkie cztery boki dokumentu znajdą się w polu widzenia, zdjęcie zostanie wykonane automatycznie.
- Należy się upewnić, że poziom został wyrównany najbardziej jak to możliwe, a pozycja skanowania maksymalnie wyśrodkowana. Zbytne odchylenie od środka arkusza uniemożliwi SmartVision2 automatyczne wykrycie konturów dokumentu.
- Należy się upewnić, że oświetlenie jest wystarczające. Rozpoznawanie znaków nie będzie optymalne, jeśli cienie zakrywają tekst dokumentu.
- Zdjęcie nie może być poruszone. Rozpoznawanie znaków nie będzie dobre, gdy obraz jest rozmaźany..

Ograniczenia OCR

Chociaż technologia skanowania OCR z biegiem lat uległa dużej poprawie, żadne oprogramowanie OCR nie jest w 100% dokładne. Istnieją ograniczenia dotyczące materiałów źródłowych i formatowania znaków. Oto one:

- Ilość błędów zależy od jakości i rodzaju dokumentu, w tym od zastosowanej czcionki.
- Tekst źródła o rozmiarze czcionki mniejszym niż 12 punktów sprawi, że błędów będzie więcej.
- Tekst o niskim kontraście między kolorem czcionki i kolorem papieru tła może być niemożliwy do zeskanowania.
- Pismo odręczne nie jest rozpoznawane.
- Litery o rozmytym konturze będą generować błędy.
- Tekst na błyszczących kartkach generuje więcej błędów.
- Niepożądane odbicia na stronie skanowania spowodują błędy.

Jak zapisać wynik skanowania OCR?

Po wywołaniu wyniku OCR można użyć klawisza Menu, a następnie przycisku Zapisz jako notatkę. Wynik zostanie zapisany i będzie dostępny jako uwaga w Notatkach.

O tym dokumencie

Informacje opublikowane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. KAPSYS zastrzega sobie wszelkie prawa do modyfikowania treści tego dokumentu bez obowiązku powiadamiania jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmiotu. KAPSYS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne lub za pominięcie treści w niniejszym dokumencie, jak też za szkody - przypadkowe lub powstałe w konsekwencji korzystania z tego dokumentu. KAPSYS dąży do ciągłej poprawy jakości i funkcji tego produktu, dlatego firma zachęca do odwiedzania strony internetowej www.kapsys.com, w celu uzyskania najnowszych aktualizacji dotyczących użytkowania i działania produktu. Produkt spełnia wymagania znaku CE, dotyczące kategorii środowiska

mieszkalnego, produktu komercyjnego lub produktu przemysłu lekkiego. Długotrwałe słuchanie urządzenia na zestawie słuchawkowym przy pełnej głośności może być przyczyną uszkodzenia słuchu.

Problemy techniczne

Przed kontaktem z serwisem należy przeczytać następujące zalecenia:

- By zachować optymalną sprawność urządzenia, zalecane jest jego wyłączanie od czasu do czasu.
- Zalecane jest pełne naładowanie baterii w celu poprawy jej funkcjonowania i wykonanie następujących testów:

Kiedy telefon się nie włącza i widoczny jest czarny ekran:

- Należy wcisnąć przycisk On / Off do momentu pojawienia się ekranu właściwego.
- Sprawdzić poziom naładowania baterii.
- Sprawdzić styki baterii, wyjąć i włożyć baterię, po czym ponownie włączyć telefon.

Jeśli występują trudności z odczytaniem zawartości ekranu:

- Należy wyczyścić ekran.
- Dostosować jasność ekranu do warunków oświetleniowych (szybkie ustawienie z poziomu panelu powiadomień).

Jeśli telefon sam się wyłącza:

- Należy wcisnąć przycisk On / Off, by ponownie go włączyć.
- Sprawdzić poziom naładowania baterii.

Gdy telefon zbyt krótko pracuje na baterii:

- Należy mieć pewność, że był przestrzegany pełny czas ładowania (minimum 4 godziny).
- W celu wydłużenia czasu pracy baterii należy wyłączyć Wi-Fi, bluetooth i GPS jeśli nie są używane (szybkie ustawienie z panelu powiadomień).

Gdy bateria telefonu nie ładuje się prawidłowo:

- Należy się upewnić, czy bateria nie jest całkowicie rozładowana.
- Mieć pewność, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (0 ° C + 40 ° C).

- Sprawdzić, czy bateria znajduje się w telefonie. Powinna być w nim umieszczona przed włączeniem ładowarki.
- Mieć pewność, że używana jest ładowarka dostarczona przez KAPSYS.
- Poza granicami kraju zamieszkania sprawdzić zgodność zasilania.

Gdy telefon nie łączy się z siecią komórkową:

- Należy spróbować połączyć się w innym miejscu.
- Sprawdzić zasięg sieci operatora komórkowego.
- Sprawdzić, czy tryb samolotowy został wyłączony.
- Sprawdzić u dostawcy usług telefonicznych, czy karta SIM jest ważna.
- Jeśli sieć jest przeciążona, spróbować połączyć się w późniejszym czasie.
- Usunąć i ponownie włożyć kartę SIM.

Gdy interfejs głosowy nie działa :

- W trybie zamiany tekstu na mowę należy sprawdzić transmisję danych (Wi-Fi, 3G).
- Sprawdzić czy użyte zostało właściwe słowo kluczowe lub polecenie głosowe.

Gdy pojawi się następujący komunikat: Błąd karty SIM / Brak dostępu do funkcji telefonu:

- Należy sprawdzić czy karta SIM została umieszczona poprawnie.
- Sprawdzić czy chip karty nie jest uszkodzony lub podrapany.

Gdy nie można wykonać połączenia wychodzącego:

- Należy się upewnić, że wybrany numer jest poprawny.
- Sprawdzić kod kraju, jeśli wykonywane jest połączenie międzynarodowe.
- Upewnić się, że telefon jest połączony z siecią i sieć nie jest przeciążona lub niedostępna.
- Podczas pobytu za granicą skontaktować się z dostawcą usług komórkowych i spytać o zasubskrybowane opcje połączeń międzynarodowych.
- Upewnić się, że tryb samolotowy został wyłączony.

Gdy nie można odebrać połączenia przychodzącego:

- Należy się upewnić czy telefon jest włączony, czy jest połączony z siecią, sprawdzić czy sieć nie jest przeciążona lub niedostępna.
- Upewnić się, że tryb samolotowy jest wyłączony.

Gdy jakość połączenia jest zła:

- Przy użyciu przycisków Głośniej i Ciszej znajdujących się na lewej krawędzi SmartVision2 należy wyregulować poziom głośności w trakcie rozmowy.
- Sprawdzić wskaźnik siły sygnału sieci na pasku stanu.

Po wybraniu kontaktu z listy telefon nie wybiera numeru:

- Należy sprawdzić czy numer telefonu został poprawnie zapisany.
- W przypadku wykonywania rozmów międzynarodowych sprawdzić czy wybrany został prefiks kraju.

Gdy korespondenci nie mogą zostawić wiadomości w poczcie głosowej:

- Należy sprawdzić, czy operator telefonii komórkowej udostępnia tę usługę.

Gdy nie ma dostępu do poczty głosowej:

- Należy sprawdzić, czy wprowadzony numer poczty głosowej jest prawidłowy.
- Jeśli sieć jest zajęta, spróbować odsłuchać pocztę w późniejszym czasie.

Zablokowana karta SIM:

- Jeśli trzykrotnie wpisano nieprawidłowy kod PIN należy skontaktować się z dostawcą usług komórkowych w celu uzyskania kodu PUK.

Informacje prawne i gwarancja

Środki ostrożności i zalecenia dotyczące użytkowania

- Z urządzeniem SmartVision2 i jego akcesoriami należy obchodzić się ostrożnie - nie rzucać nimi i nie upuszczać ich.
- Nie należy demontować produktu, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji
- Do czyszczenia urządzenia należy stosować wyłącznie miękkie materiały. Nie należy stosować chemikaliów, detergentów lub środków ściernych.
- Produkt ten nie jest wodoszczelny. Należy go chronić przed wilgocią i cieczami.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, unikać przechowywania go w miejscach gorących, wilgotnych i narażonych na działanie korozji.
- Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu miejsc narażonych na działanie pola magnetycznego.
- Nie należy korzystać z telefonu, gdy ekran jest pęknięty lub rozbity, ponieważ może to spowodować zranienie.
- Nie należy korzystać z urządzenia na obszarach zagrożonych wybuchem.
- Nie można ładować urządzenia w temperaturze poniżej 0 stopni C lub powyżej 45 stopni C.
- Bez zgody upoważnionego personelu medycznego nie należy korzystać z urządzenia w placówkach ochrony zdrowia, zwłaszcza w pobliżu elektronicznego sprzętu medycznego.
- Szkodliwe jest wystawianie urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. (1) Zakres temperatury roboczej wynosi od -10°C (14°F) do +55°C (131°F); (2) temperatura krótkotrwałego przechowywania wynosi od -20°C (-4°F) do +60°C (140°F); (3) temperatura długotrwałego przechowywania wynosi od -10°C (-4°F) do +25°C (77°F).
- Produkt został wyposażony we wbudowaną baterię litowo-polimerową. Wymagane jest całkowite naładowywanie baterii, by wydłużyć czas jej pracy.
- Długotrwałe korzystanie z urządzenia może powodować jego nagrzewanie się.
- Dla zachowania optymalnej sprawności urządzenia zaleca się wyłączanie go od czasu do czasu i wyjmowanie baterii.

Bezpieczeństwo i zdrowie

- Urządzenie należy przechowywać z dala od małych dzieci.
- Nie należy korzystać z urządzenia podczas jazdy samochodem, ponieważ zajmuje to ręce. Należy prowadzić pojazd w bezpieczny i odpowiedzialny sposób, przestrzegając zasad ruchu drogowego.
- Należy chronić słuch, unikając długotrwałej ekspozycji na wysoki poziom dźwięku podczas korzystania ze słuchawek, głośników lub odbiornika.
- Jeśli używają Państwo rozrusznika serca lub mieszkają Państwo w pobliżu osoby, która go używa, można poprosić lekarza lub producenta rozrusznika o poradę dotyczącą korzystania z urządzenia bezprzewodowego.
- Urządzenia radiowe mogą zakłócać bezpieczne i efektywne korzystanie z niektórych urządzeń medycznych, jeśli nie są one odpowiednio chronione.

Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności

Ograniczenia gwarancji

Kapsys, producent urządzenia, posiada biuro zarejestrowane pod adresem 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Mougins Sophia Antipolis (06250), France. Kapsys gwarantuje, że produkt jest zgodny z opisem (opis jest dostępny na stronie internetowej www.kapsys.com), zgodnie z postanowieniami artykułów L.211-1 i nast. francuskiego kodeksu konsumenckiego.

Kapsys gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że od daty zakupu i tak długo, jak jest używany w normalnych warunkach i zgodnie z jego przeznaczeniem, produkt jest wolny od wad produkcyjnych i materiałowych.

Produkt ten posiada dwuletnią (2) gwarancję, zaś dołączone do niego akcesoria, w tym bateria, podlegają gwarancji sześciomiesięcznej (6), liczonej od daty zakupu.

W okresie gwarancji handlowej urządzenie może zostać naprawione lub wymienione bezpłatnie przez firmę Kapsys lub autoryzowanych przez nią dostawców usług (z wyłączeniem kosztów transportu).

Jeśli urządzenie jest niezdatne do użytku lub nie może być używane przez więcej niż siedem dni (7), okres gwarancji produktu naprawianego w ramach gwarancji jest automatycznie przedłużany o czas naprawy.

Gwarancja Kapsys nie obejmuje:

- Normalnych śladów użytkowania urządzenia i zmniejszenia się pojemności baterii.
- Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, narażenia na działanie wilgoci lub cieczy, lub na bliskość źródeł ciepła.
- Pęknięć lub uszkodzeń oraz widocznych oznak uderzeń.
- Nieprzestrzegania środków ostrożności dotyczących użytkowania, wypadków, zaniedbania, niewłaściwego użycia lub użycia niezgodnego z dołączoną instrukcją obsługi, komercyjnego wykorzystania urządzenia.
- Zwarcia baterii lub użycia baterii w urządzeniu innym niż SmartVision2.
- Użycia akcesoriów lub złączy innych niż zalecane przez KAPSYS.
- Uszkodzeń wynikających z prób naprawy dokonanej przez osobę nieupoważnioną przez Kapsys

Ograniczona gwarancja zawarta w niniejszym dokumencie oraz zgodność z obowiązującymi przepisami wyklucza wszelkie inne domniemane gwarancje i / lub obowiązki spoczywające na sprzedawcy, w szczególności, ale nie ograniczając się do jakiegokolwiek zobowiązania pod względem zadowalającej jakości, niezawodności lub dostępności, dokładności lub kompletności odpowiedzi, wyników oraz informacji dostarczonych przez produkt lub dostępności danych. Zaleca się utworzenie jednej lub kilku kopii zapasowych danych zapisanych w urządzeniu. KAPSYS nie odpowiada za utratę danych wynikającą z uszkodzenia, naprawy lub wymiany urządzenia.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym przypadku KAPSYS nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub osoby trzeciej za jakiegokolwiek pośrednie, specjalne, wynikowe, przypadkowe lub karne szkody powstałe w wyniku umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób, w tym między innymi obrażenia, utraty dochodów, utraty wartości firmy, utraty możliwości biznesowych, utraty danych i / lub utraty zysków, bez względu na ich przewidywalność lub gdy KAPSYS został poinformowany o możliwości wystąpienia

takich szkód. W żadnym przypadku całkowita odpowiedzialność KAPSYS nie przekroczy kwoty otrzymanej od kupującego, niezależnie od teorii prawnej, w której podnoszona jest przyczyna. Powyższe nie ma wpływu na żadne ustawowe prawa, których nie można się zrzec.

Serwery sieciowe i / lub usługi systemów komórkowych są dostarczane przez strony trzecie za pośrednictwem systemów komunikacyjnych, sieci i mediów, nad którymi KAPSYS nie ma żadnej kontroli, a zatem nie może zapewnić dostępności i efektywności ich działania. Zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z odpowiednimi dostawcami w celu uzyskania wsparcia związanego z ich usługami.

Informacje na temat poziomu absorpcji energii

Urządzenie SmartVision2 to nadajnik / odbiornik radiowy. Został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z progami ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF), zalecanymi przez Unię Europejską.

To urządzenie spełnia wymagania UE (1999/519 / EC) dotyczące ochrony zdrowia w sprawie ograniczenia narażenia ogółu społeczeństwa na pola elektromagnetyczne. Jednostką miary zalecanego przez Radę Europejską limitu dla telefonów komórkowych jest "współczynnik absorpcji swoistej" (SAR). Ów limit SAR wynosi 2,0 W / kg i jest uśredniony dla 10 g tkanki ciała. Urządzenie to spełnia wymagania Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) i Normy Europejskiej EN 62209-1 / EN 62209-2 dla mobilnych urządzeń radiowych.

W przypadku akcesoriów noszonych na ciele ten telefon został przetestowany w użyciu z akcesoriami, które nie zawierają metalu i których słuchawka jest umieszczana w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. Korzystanie z innych akcesoriów może nie zapewniać zgodności z ekspozycją na fale radiowe. Jeśli nie używają Państwo akcesorium do noszenia na ciele i nie trzymają telefonu przy uchu, należy umieścić słuchawkę w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała, gdy telefon jest włączony.

Podczas użytkowania rzeczywisty poziom SAR jest zwykle znacznie niższy niż wartość maksymalna. Ogólnie rzecz biorąc, im bliżej stacji bazowej, tym niższa moc wyjściowa telefonu komórkowego. By zredukować ekspozycję na energię fal radiowych, należy używać zestawu głośnomówiącego lub innej podobnej opcji, aby nie zbliżać urządzenia do głowy i ciała.

Najwyższe wartości SAR tego urządzenia zostały wymienione poniżej:

- Głowa: 0,178 W / kg (uśredniona dla 10 g tkanki ciała)
- Ciało: 1,148 W / kg (uśredniona dla 10 g tkanki ciała)

Obsługa klienta

W celu uzyskania wsparcia technicznego prosimy o kontakt z serwisem firmy ALTIX pod numerem tel. 41 343 80 00 lub na adres email: serwis@altix.pl Serwis klientów KAPSYS – 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, Francja.

Można także odwiedzić naszą stronę: www.kapsys.com.

Znaki handlowe

Firmy i marki produktów, o których mowa w niniejszym dokumencie oraz w podręczniku, są znakami towarowymi zarejestrowanymi lub nie i należą do odpowiedniego właściciela.

Słowa, marki i loga Kapsys są zarejestrowanymi znakami towarowymi Kapsys SAS. Słowa, marki i loga, takie jak Android, Klawiatura Google, Google Reader, Sklep Play, Muzyka Play, Google Parameters są zastrzeżonymi znakami towarowymi Google Inc. w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.

Nazwy marki i loga ABBYY są zarejestrowanymi znakami towarowymi ABBYY Software Ltd.

Nazwy marki i loga bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG Inc.

Nuance jest zarejestrowanym znakiem towarowym Nuance Corporation Inc.

Wszystkie nazwy marek i produktów są nazwami lub nazwami zarejestrowanymi jako znaki towarowe firm.

O tym dokumencie

Informacje opublikowane w niniejszym dokumencie mogą się zmienić bez powiadomienia. KAPSYS zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego dokumentu bez obowiązku powiadamiania jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmiotu. Firma Kapsys nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne lub pominięcia w niniejszym dokumencie, ani w sytuacji szkody przypadkowej, ani pośredniej, ani też szkody wynikłej z eksploatacji produktu lub korzystania z tego dokumentu. KAPSYS dokłada wszelkich starań, by stale ulepszać produkowane urządzenie oraz jakość i wydajność jego funkcji. W związku z tym Kapsys zaprasza na stronę internetową (www.kapsys.com), w celu uzyskania najnowszej aktualizacji dotyczącej użytkowania i działania urządzenia SmartVision2.

Specyfikacja techniczna

System operacyjny

- Android 6.0

Wygląd

- Wymiary: 152 x 66 x 10 mm
- Waga: 150 g
- Ekran dotykowy: 4" LCD IPS

Sprzęt

- Procesor: Quad Core 64-Bit @ 1.3 GHz
- Pamięć wewnętrzna: RAM 2GB, Flash 16GB
- Pamięć zewnętrzna: karta micro SD o pojemności do 64 GB
- Łączność komórkowa:

4G LTE

3G+ / 3G

2G

- Łączność bezprzewodowa:

Bluetooth 4.0 BLE

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n 2,5 GHz / 5GHz

- Odbiornik satelitarny: GPS, Glonass z obsługą A-GPS
- Inne czujniki: akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, cyfrowy kompas
- Format karty SIM: 4FF

- Gniazda: mini jack audio 3,5 mm, USB typ C
- Pobór energii:

Bateria: 2700 mAh Li-ion

Czas czuwania: 350 godzin

Czas rozmów: 12 godzin

- DAS : 0,178 W / Kg

KAMERA

- Rozdzielczość: 2 Megapixeles przednia / 8 Megapixeli tylna
- Wideo: HD 720p @ 30 fps
- Fokus : ręczny i automatyczny
- Zoom cyfrowy: 4 x
- Lampa błyskowa: 2 diody LED